


Katheterismus Zubehör

Catheterisation Accessories

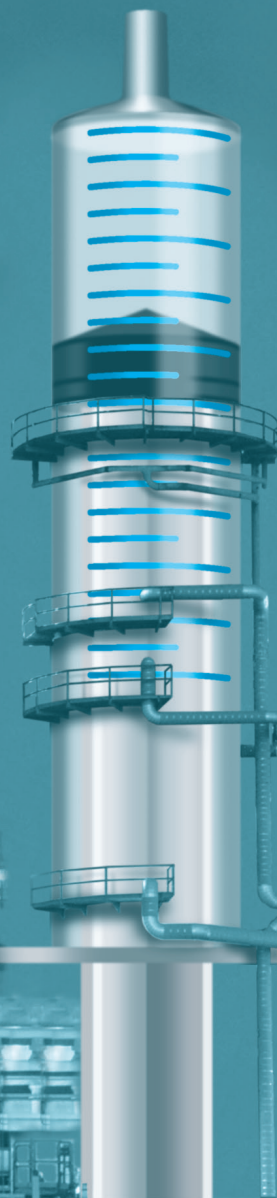

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

UROMED Katheterventil »universal«

UROMED Catheter Valve »universal«

REF 1500 / 1501 / 1505

Harnlassen auf Knopfdruck. Das bedeutet kontaminationsfreie Bedienung und gezieltes Blasentraining.

To urinate by the touch of a button. This means contamination-free use and methodical bladder training.

Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter

- wiederholtes Einsetzen und Lösen eines Katheterstopfens entfällt
- einhändige Bedienbarkeit des Druckknopfes
- automatisches Schließen nach Loslassen des Druckknopfes
- sauberer Tropfenabriss
- sehr leicht (10 g)
- körperfreundliche Form
- Daueröffnung mit integriertem Schieber
- zuverlässiges und schnelles Adaptieren eines UROMED CYSTOBAG Urinbeutels ohne Manipulation am Katheter

Catheter valve to control the bladder drainage with a permanent urinary catheter

- repeated insertion and detachment of a catheter plug is not required
- one-handed usability of the push-button
- automatic closing after release of the push-button
- clean drop separation
- very light (10 g)
- contoured shape
- permanent opening with integrated slider
- safe and fast adapting of a UROMED CYSTOBAG urine bag without manipulating the catheter



REF 1500


UROMED Katheterventil »universal«
UROMED catheter valve »universal«



REF 1505

UROMED Katheterventiladapter mit Sicherheitsbajonettverschluss zur Verbindung eines Katheterventils mit einem UROMED Urinbeutel mit Stufenkonnektor

UROMED catheter valve adapter with safety bayonet lock for connection of a catheter valve with a UROMED urine bag with step connector

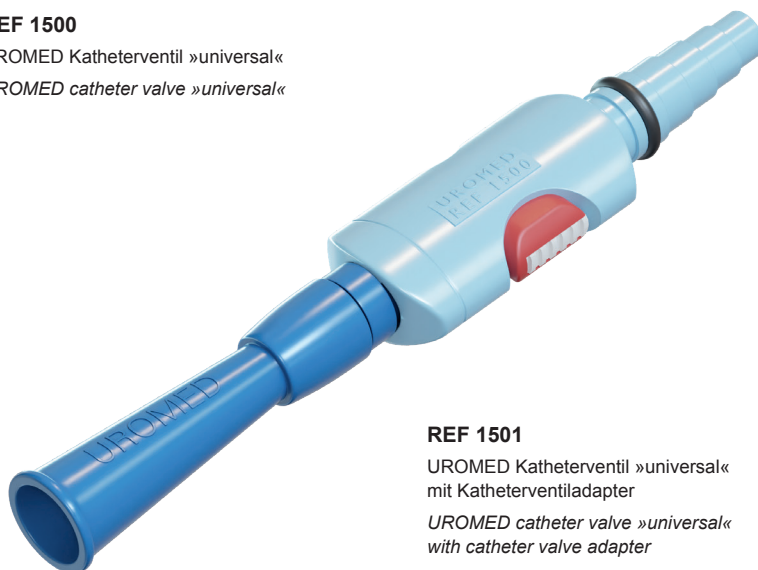

REF 1501

UROMED Katheterventil »universal« mit Katheterventiladapter
UROMED catheter valve »universal« with catheter valve adapter

REF	PZN
REF	CPN
1500	04741874
1501	07198560
1505	07198577

Hilfsmittelkatalog: 15.25.16.0017

Verpackung: steril
Originalkarton: 5 Stück
Packaging: sterile
Original carton: 5 pieces

UROMED Katheterventil »compact«

UROMED Catheter Valve »compact«

REF 1504

Ist der Anschluss eines Urinbeutels nicht gewünscht, findet das UROMED Katheterventil »compact« Anwendung. Es enthält keinen Schiebemechanismus für eine Daueröffnung.

The UROMED catheter valve »compact« should be used if the connection with a urine bag is not required. It does not offer a slider mechanism for permanent opening.

Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter

- wiederholtes Einsetzen und Lösen eines Katheterstopfens entfällt
- einhändige Bedienbarkeit des Druckknopfes
- automatisches Schließen nach Loslassen des Druckknopfes
- sauberer Tropfenabriss
- sehr leicht (10 g)
- körperfreundliche Form

Catheter valve to control the bladder drainage with a permanent urinary catheter

- repeated insertion and detachment of a catheter plug is not required
- one-handed usability of the push-button
- automatic closing after release of the push-button
- clean drop separation
- very light (10 g)
- contoured shape



Mehrwert durch das UROMED Katheterventil

Die Dauerableitung des Harns in einen Urinbeutel hat eine permanente Entleerung der Blase zur Folge. Die Blasenmuskulatur erschlafft, weil der natürliche Entleerungsrhythmus unterbunden ist.

Mit dem UROMED Katheterventil kann der Patient dem selbst gezielt entgegenwirken und den Erhalt der natürlichen Blasenfunktion fördern.

Added value with the UROMED catheter valve

The constant drainage of urine into an urine bag leads to a permanent emptying of the bladder. The bladder musculature languishes as the natural rhythm of emptying is interrupted.

With the UROMED catheter valve the patient can counteract methodically and promote the preservation of natural bladder function.

REF	PZN
REF	CPN
1504	00051888

Hilfsmittelkatalog: 15.25.16.0017

Verpackung: steril
Originalkarton: 5 Stück
Packaging: sterile
Original carton: 5 pieces

UROMED Katheterventil »basic«

UROMED Catheter Valve »basic«

REF 1506

Das UROMED Katheterventil »basic« ist insbesondere auch für Patienten mit eingeschränkter Handmotorik geeignet. Die patientenorientierte Kennzeichnung von open/close am Hebel bietet eine eindeutige visuelle Orientierungshilfe, ob das Katheterventil geöffnet oder geschlossen ist.


The UROMED catheter valve »basic« is particularly well suited for patients with limited hand motorics. The patient-friendly open/close marking on the lever offers a clear visual orientation whether the catheter valve is open or closed.

Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter

- Daueröffnung durch Kipphebel möglich
- wiederholtes Einsetzen und Lösen eines Katheterstopfens entfällt
- durch Kipphebelmechanismus auch für Patienten mit eingeschränkter Handmotorik geeignet
- verlängerter Steg verhindert Berührung des Hebels mit dem Kathetertrichter und reduziert somit zudem das Kontaminationsrisiko
- konischer Stufenkonnektor sorgt für eine sichere Verbindung von Katheterventil und Katheter
- Ansatzstück für eine sichere Konnektion mit UROMED Urinbeuteln
- kleine und sehr leichte Bauweise ermöglicht komfortables Tragen

Catheter valve to control the bladder drainage with a permanent urinary catheter

- permanent opening possible by lever
- repeated insertion and detachment of a catheter plug is not required
- lever mechanism makes the device suitable for patients with limited hand motorics
- extended bar prevents contact between the lever and the catheter funnel and thus reduces the risk of contamination
- conically graduated connector ensures safe connection between catheter valve and catheter
- attachment for the secure connection with UROMED urine bags
- small and very lightweight design for comfortable wearing

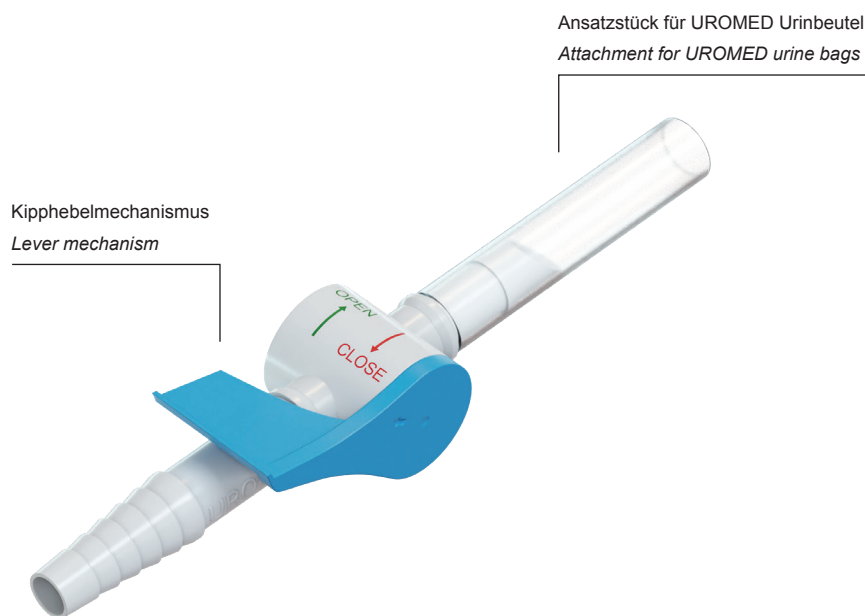

REF	PZN
REF	CPN
1506	13813549
Hilfsmittelkatalog: 15.25.16.0029	

Verpackung: steril
Originalkarton: 5 Stück
Packaging: sterile
Original carton: 5 pieces

Katheterstopfen

Catheter Plug


REF 1514

Länge 55 mm

Length 55 mm

- stumpf-konisch
- gerieft

- *blunt-conical*
- *grooved*

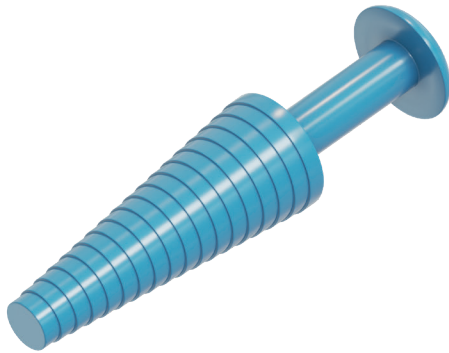

REF REF	PZN CPN
1514	07487471

Verpackung: steril
Originalkarton: 100 Stück
Packaging: sterile
Original carton: 100 pieces


Katheterklemme

Catheter Clamp

REF 1515

mit Arretierung

with locking mechanism

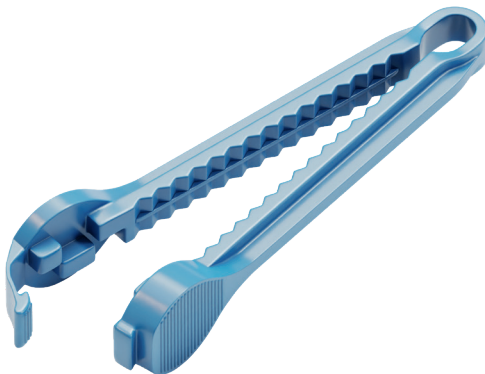

REF REF	PZN CPN
1515	9999028
Hilfsmittelkatalog: 15.99.99.0001	

Verpackung: unsteril
Verpackungseinheit: 200 Stück
Packaging: non-sterile
Packaging unit: 200 pieces

UROMED Füllmedium

UROMED Filling Medium

REF 1550

Bringen Sie Konstanz in die Ballons Ihrer Silikonkatheter!


Create constancy in the balloons of your silicone catheters!

Füllmedium zum Füllen von urologischen Ballonkathetern

- enthält 10% wässrige Glycerinlösung
- hält das Füllvolumen konstant
- latexfrei

Filling medium for filling urological balloon catheters

- contains 10% aqueous glycerin solution
- keeps the filling volume constant
- free of latex

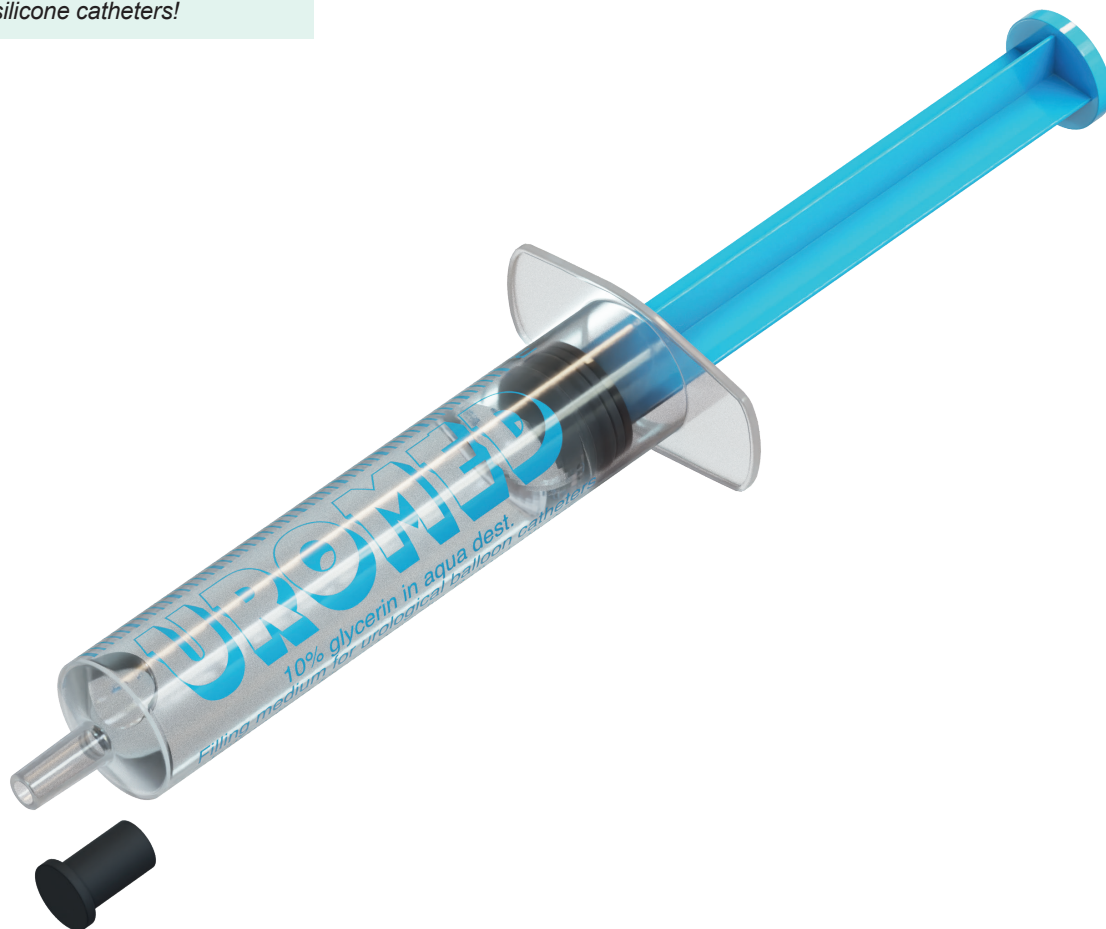

Diffusion bei Silikonballonkathetern

Die Ballons der Silikonballonkatheter lassen allgemein materialbedingt eine Diffusion zu. Dadurch kann sich der Ballon langsam entleeren. Das gilt im Besonderen für Nephrostomie- und suprapubische Ballonkatheter mit geringem Füllvolumen. Das UROMED Füllmedium hilft durch das enthaltende Glycerin eine Diffusion effektiv zu reduzieren.

Diffusion of silicone balloon catheters

The balloons of silicone balloon catheters in general allow a diffusion caused by the material. Therefore the balloon might evacuate slowly. This applies especially to nephrostomy and suprapubic balloon catheters with small filling volume. The UROMED filling medium helps to reduce any diffusion effectively due to the glycerin.

REF	Volumen	PZN
REF	Volume	CPN
1550.05	05 ml	00730833
1550.10	10 ml	00730827

Hilfsmittelkatalog: 15.99.99.0006

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück
Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

Katheterisierungs-Set

Catheterisation Set

REF 1568

Inhalt:

- 1 Plastikschale, 2-teilig
- 6 Schlinggazetupfer
- 4 Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 1 Pinzette
- 1 Luer-Spritze, 10 ml, zum Entblocken
- 1 Luer-Spritze mit Wasser und 10% Glycerin, 10 ml, steril
- 1 Gleitgel, 6 ml, steril
- 1 Antiseptikum, 15 ml
- 1 Schlitz-Lochtuch, 60 x 60 cm
- 2 Nitril-Handschuhe, ungepudert

eingeschlagen in:

- 1 wasserfeste Unterlage, 60 x 60 cm

Content:

- 1 plastic tray, 2 compartments
- 6 gauze balls
- 4 gauze swabs, 7,5 x 7,5 cm, 8 ply
- 1 pair of tweezers
- 1 Luer syringe, 10 ml, to unblock
- 1 Luer syringe with water and 10% glycerin, 10 ml, sterile
- 1 lubricating gel, 6 ml, sterile
- 1 antiseptic, 15 ml
- 1 drape with slit opening, 60 x 60 cm
- 2 nitril gloves, no powder

wrapped up in:

- 1 water repellent coverdrape, 60 x 60 cm



REF	PZN
REF	CPN
1568	12490179

Verpackung: steril
Originalkarton: 50 Stück
Packaging: sterile
Original carton: 50 pieces



PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
22113 Oststeinbek
DEUTSCHLAND

Zentrale	+49 (0) 40 71 30 07-0
Kliniken	+49 (0) 40 71 30 07-11
Praxen	+49 (0) 40 71 30 07-21
Apotheken/Handel	+49 (0) 40 71 30 07-31
Pflegedienste/Altenheime	+49 (0) 40 71 30 07-33

Fax +49 (0) 40 71 30 07-99

E-Mail service@uromed.de

www.uromed.de

Die Angaben entsprechen unserem
Kenntnisstand bei Drucklegung.
Produktänderungen aufgrund
technischen Fortschritts vorbehalten.

*All indications correspond to our
knowledge at the date of press.
Due to technical progress all products
are subject to change.*

MA0039 · Rev. 3 · 05/2024

©UROMED Kurt Drews KG