

REF 7530/40 ...

mit Spitze
4-Draht-Körbchen, helikal
with tip
4-wire-basket, helical

Bei dem »STONIZER®« mit Spitze kann zwischen dem bewährten 3-Finger Griff und der Ausführung mit **Stabgriff** gewählt werden.


The »STONIZER®« with tip is available with proven 3-finger handle or **stick handle**.

Fangkörbchen zur ureterorenoskopischen Steinentfernung

- zur Anwendung im Ureter geeignet
- knickstabil
- bequeme Einhand-Bedienung durch ergonomischen Stabgriff mit Daumenschieber
- hohe Formstabilität durch Korbelement aus Nitinol
- konzentrisches Schließen des Körbchens auf dem Schaft durch das abgestufte Spitzenelement
- sehr gute Gleiteigenschaften des Nitinol-Zugdrahtes durch PTFE-Beschichtung
- hohe Funktionalität auch bei stark abgewinkeltem Schaft
- sehr gutes Rotationsverhalten (1:1 Rotation)
- hochwertige Blister-Verpackung mit zusätzlichem Clipless-Dispenser
- zur einmaligen Verwendung

Retrieval basket for ureterorenoscopic stone extraction

- for use in the ureter
- kink resistant
- comfortable one-handed-use due to stick handle with thumb tab
- high shape stability due to nitinol basket
- stepped tip feature guarantees concentric closing of the basket
- excellent gliding ability of the nitinol wire due to PTFE coating
- high functionality even with intense bended shaft
- excellent rotation characteristics (1:1 rotation)
- high-quality blister packaging with additional clipless dispenser
- single use

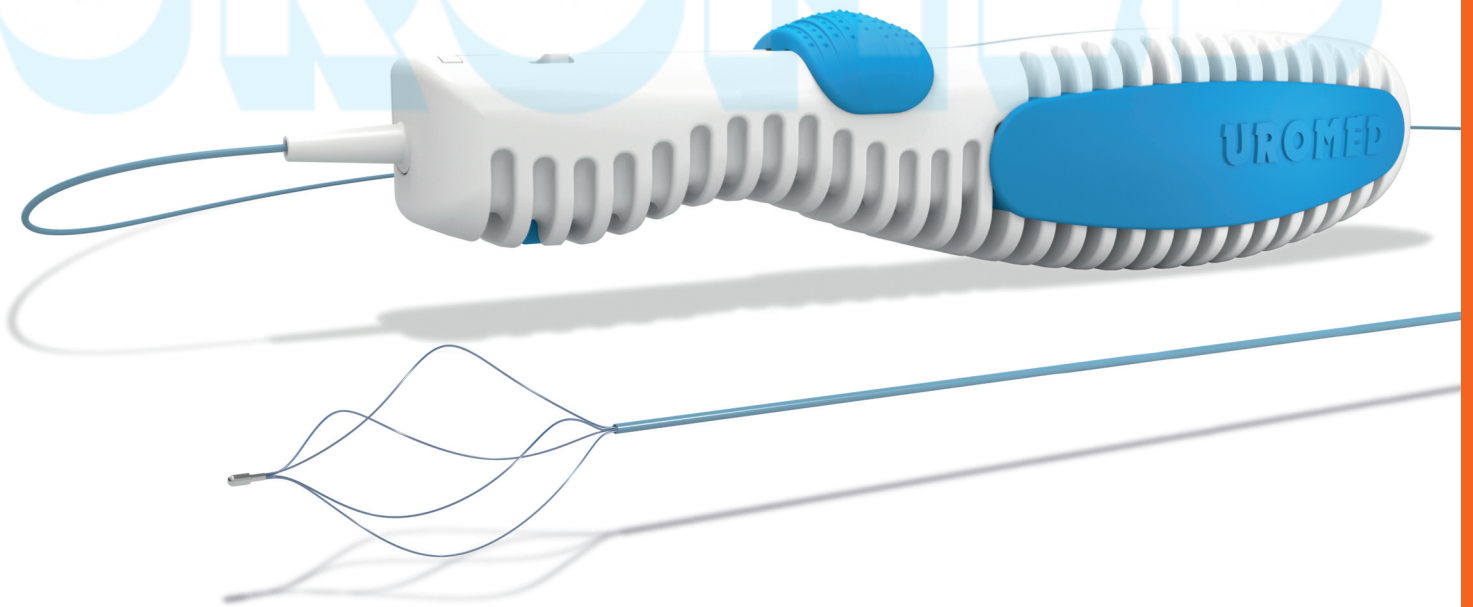

REF REF	Größen (FR/CH) Sizes (FR/CH)	Länge Length	Ø Korb Ø Basket
75309015	Ch. 3,0	90 cm	15 mm
75409015	Ch. 4,0	90 cm	15 mm

Verpackung: steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE