


UROMED CYSTOBAG® TK 2000 »COMFORT«

REF 4802

**geschlossenes Urin-Drainage-System
2000 ml, Schlauchlänge 112 cm**
*closed urine drainage system
2000 ml, tube length 112 cm*

CYSTOBAG® Urin-Drainage-Systeme orientieren sich an den aktuellen Anforderungen der Anwender in der Praxis – überzeugen Sie sich selbst!

CYSTOBAG® urine drainage systems are based on the actual needs of the users in practice – go and find out for yourself!

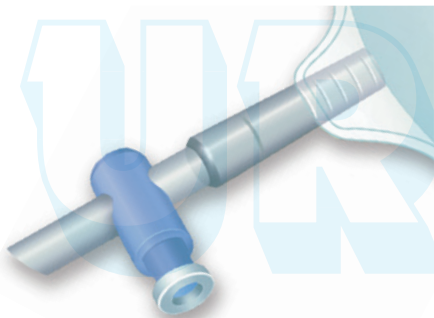

Entleeren leicht gemacht.

Der einhändig und kontaminationsfrei bedienbare T-Tap-Ablasshahn sorgt durch seinen großen Innendurchmesser für einen schnellen Ablauf.

Easy emptying.

The t-tap-outlet for one-handed use without contamination ensures a fast drain due to its wide inner diameter.



REF 4898.03

UROMED Sichtschutz / UROMED Urine Bag Cover

Urinbeutel zum Auffangen von abgeleitetem Harn

- mit latexfreien Handschuhen
- nadelfreie Urinprobenentnahmestelle
- Schlauchklemme
- Klemme zur Schlauchfixierung
- zweiteilige Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- Entlüftung an Tropfkammer und Beutel
- universell einsetzbarer Zwillingshalter mit Fixationskordel
- übersichtliche Graduierung
- T-Tap-Ablasshahn Halterung
- T-Tap-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- großlumiger Ablasshahn für schnelle Entleerung
- extrem kurze Beutellänge, 29 cm
- Beschriftungsfeld für Patientendaten



Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse.

Mit den ausgeprägten Stufen des Konnektors wird eine optimale Verbindung mit dem Katheter erreicht und Leckagen werden vermieden. Aufgrund der direkten Abstimmung auf die Trichter der UROMED Silikon-Ballon-Katheter ist die Verbindung hier besonders gut.

Step connector for reliable links.

With the distinct steps of the connector an optimal link with the catheter will be achieved and leakage will be avoided. Due to the direct adjustment to the funnels of the UROMED silicone balloon catheter the link is particularly good in this case.

Urine bag for collection of extracted urine

- with gloves free of latex
- needleless puncture spot for urine specimen
- tube clamp
- clamp for tube fixation
- two-part drip chamber with recoil blockage
- air-filter on drip chamber and bag
- twin holder with fixing cord for all-purpose use
- clearly graduated
- T-tap-port
- T-tap-outlet, one-handed use without contamination
- tap with wide lumen for fast emptying
- extremely short bag, 29 cm
- label for patient data

REF	Farbe	PZN
REF	Colour	PZN
4898.03	blau/blue	02767183

REF	Volumen	PZN
REF	Volume	PZN
4802	2000 ml	00051871

Hilfsmittelkatalog: 15.25.07.0015

Verpackung: steril
Original-Karton: 20 Stück

Packing: sterile
Original carton: 20 pieces

Ein Schlauch mit Profil.

Ziel ist es, eine Ableitung unter allen Umständen aufrechtzuerhalten. Der oktagonally profilierte Zuleitungsschlauch gewährleistet auch in geknicktem Zustand oder bei Lagerungsproblemen des Patienten eine Drainage.

A tube with profile.

The objective is to maintain a drainage at all events. The octagonally profiled supply tube guarantees a drainage even if it is bent or difficult to position the patients correctly.



Der Überall-Halter.

Der UROMED Zwillingshalter zeichnet sich durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten an verschiedensten Bettgestellen aus und positioniert sich stets senkrecht. Ein freier Tropfenfall ist gewährleistet und verhindert das Aufsteigen von Keimen.

The All-Purpose-Holder.

The UROMED twin holder stands out because it can be used on various bedsteads and always gets into a vertical position. A free fall of the drop is ensured and an ascent of germs will be avoided.

