


# Suprapubische Harnableitung

## *Suprapubic Urinary Drainage*




**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

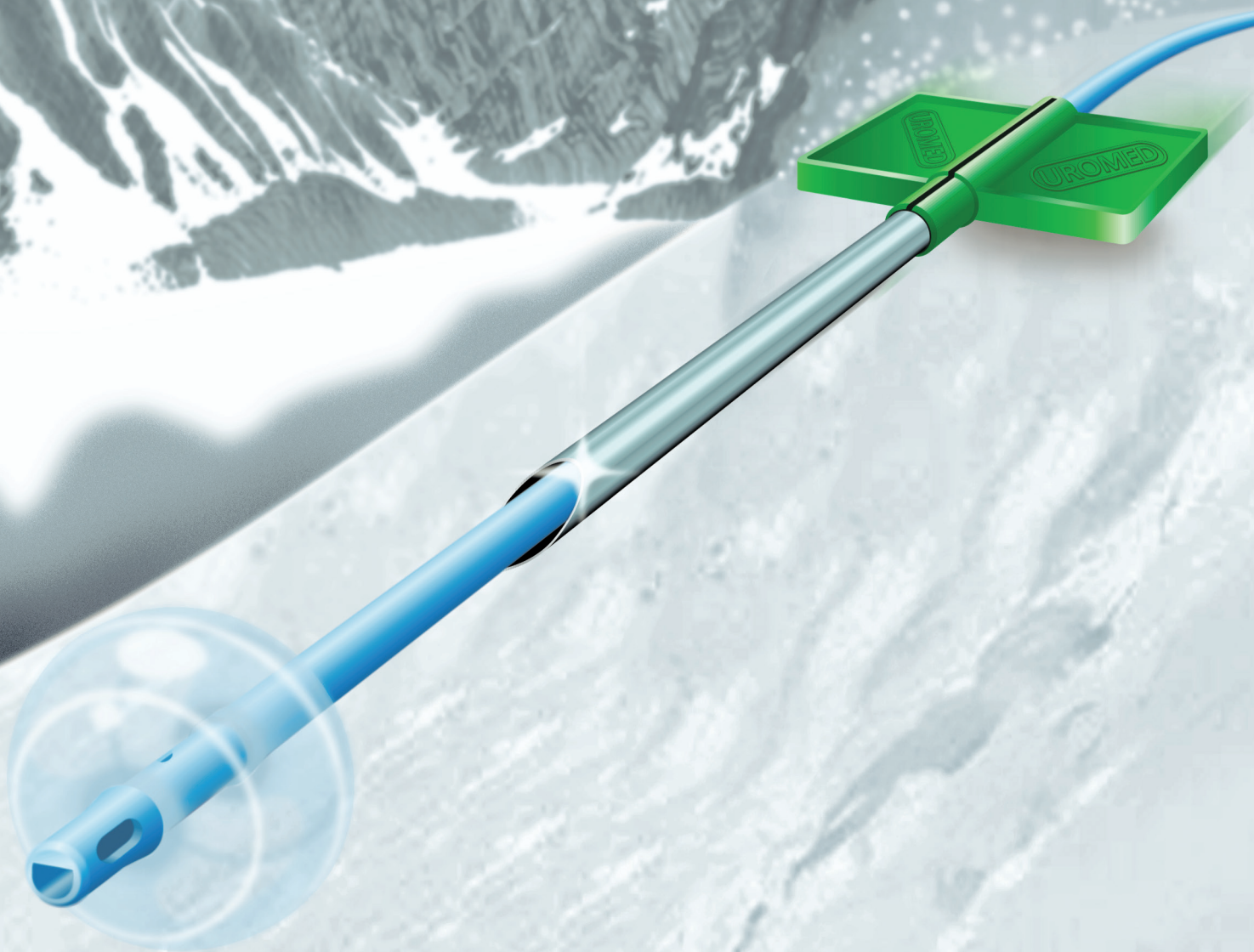





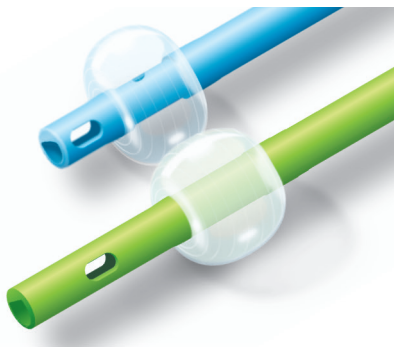

# EDITORIAL



»INTEGRAL« Katheter  
»INTEGRAL« catheter



Unterschiedliche Spitzenlängen  
different lengths of tips

	Charrière	Millimeter
	10	3,3
	12	4,0
	14	4,7
	16	5,3
	18	6,0
	20	6,7
	22	7,3
	24	8,0

Ausgehend und angeregt von Prof. Sökkelands Arbeit über die Vorteile der suprapubischen Harnableitung\* begann unser systematischer Aufbau des hier vorgestellten, umfassenden Programms. Kernpunkt und Besonderheit war die Einbeziehung eines Ballon-Katheters, durch den eine bis dahin praktizierte Hautfixierung entfallen konnte. Weitere entscheidende Schritte wie INTEGRAL-, SUPRASOFT- und DILATATIONS-KATHETER bereichern unsere Systeme und schreiben die Anforderungen an eine sichere und komfortable Anwendung fort.

## Was sind »INTEGRAL« Katheter?

Die von UROMED entwickelten »INTEGRAL« Katheter besitzen einen in die Wandung des Schaftes eingearbeiteten Ballon, es entfällt der bei herkömmlichen Modellen vorhandene Kalibersprung von mehreren Charrière. Da Silikon-Katheter im Extrusionsverfahren hergestellt werden, ist die Fertigung nur mit einer speziellen Technik möglich. Der integrierte Ballon erlaubt einen weitgehend schmerzfreien Wechsel des Katheters, die Überwindung der Fascie wird erleichtert.

## Warum ist eine kurze Spitze wichtig?

Die sehr kurze und abgerundete Katheterspitze verringert den in der Blase platzierten Teil des Katheters und mindert die Gefahr von Irritationen und Tenesmen. Die flache Ballonform unterstützt diese Eigenschaft und bietet gleichzeitig bei geringem Volumen eine sichere Fixierung.

## Unser Material

Das von uns verwendete Silikon überzeugt durch beste Gewebeerträglichkeit und geringste Inkrustationsneigung.

Eventuell notwendige Fascial-Dilatatoren finden Sie im Nephrostomie-Prospekt, Führungsdrähte sind der separaten Gruppe zu entnehmen.

*Encouraged by the paper of Prof. Sökkeland about the advantages of Suprapubic Urinary Drainage\* we systematically started building up our comprehensive programme which we would like to introduce to you in the following brochure. Central point and characteristic was the incorporation of a balloon catheter which made a practised fixation at the skin unnecessary. Further decisive steps like INTEGRAL-, SUPRASOFT- and DILATION CATHETERS enrich our programme and continue to meet the demands for a safe and comfortable application.*

## What are »INTEGRAL« Catheters?

*The »INTEGRAL« catheters developed by UROMED show a balloon integrated into the shaft and avoids a caliber jump of several Charrière, which is usual with common catheters. As silicone catheters are manufactured with the extrusion procedure the production can be realized with a special technique only. The integrated balloon allows to a great extent a painless change of the catheter, the passage of the fascia will be easier.*

## Why is a Short Tip important?

*The very short and rounded tip of the catheter reduces the part of the catheter which is placed in the urinary bladder and decreases the danger of irritations and tenesmen. The flat shape of the balloon supports this feature and offers a safe fixation despite of a small volume.*


## Our Material

*The silicone we use is convincing by the best tissue tolerance and lowest incrustation rate.*

*If fascial dilators are required please see our brochure for nephrostomy, guide-wires are listed in a separate folder.*

\* Literatur/References:

3. Sökkeland: Dauerkatheter oder suprapubische Harnableitung? Urologe B, Einlage, Jahrgang 24, Heft 5, Oktober 1984

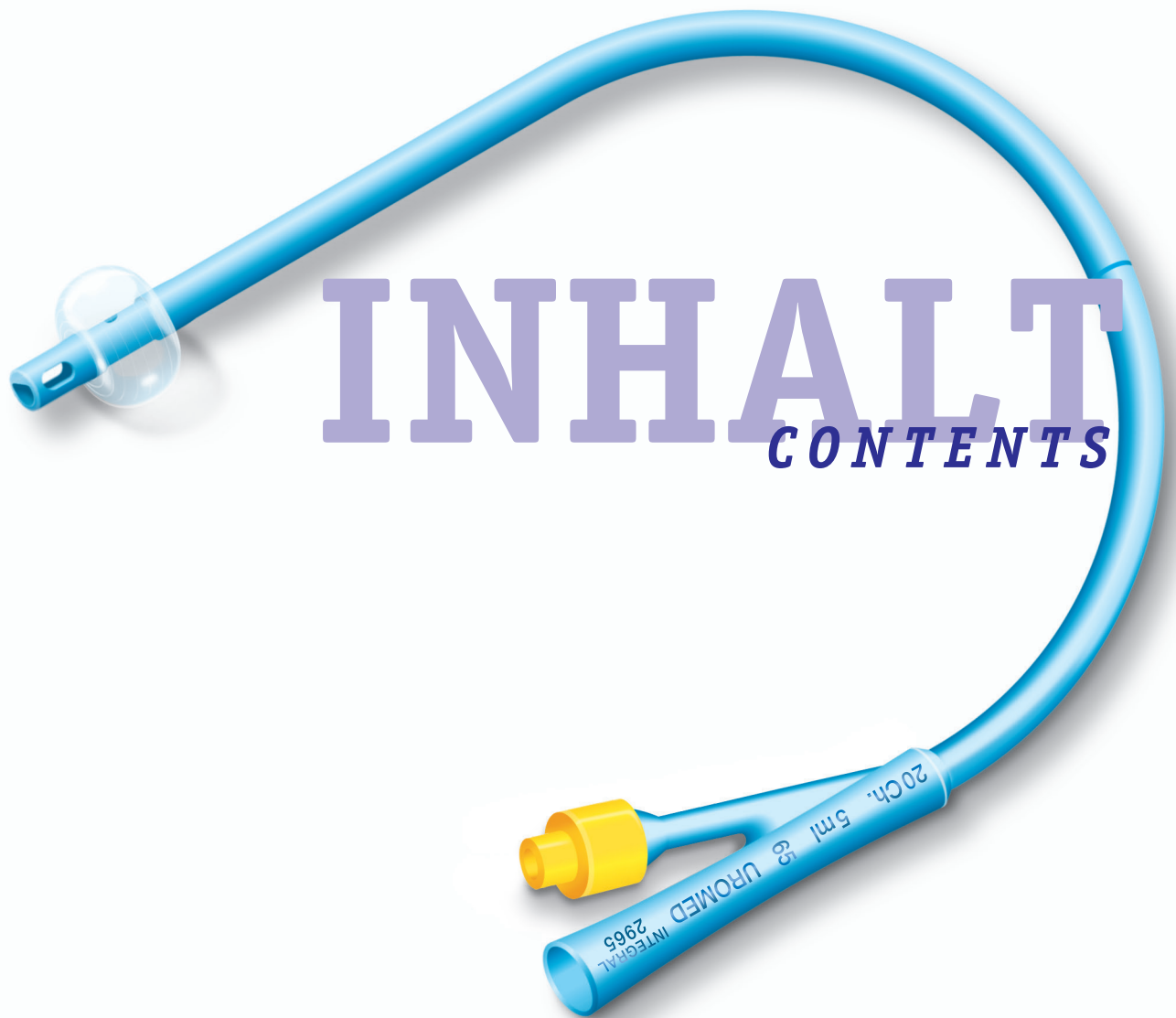

# INHALT

## CONTENTS

<b>Punktions- und Wechsel-Sets</b> <i>Puncture and Exchange Sets</i>	<b>4</b>
<b>»SUPRAPUR®« Punktions-Set in Seldinger-Technik</b> <i>Puncture Set in Seldinger-Technique</i>	<b>8</b>
<b>Dilatations-Ballon-Katheter und Set</b> <i>Dilation Balloon Catheter and Set</i>	<b>9</b>
<b>»SUPRASOFT« Doppel-Ballon-Katheter</b> <i>»SUPRASOFT« Double Balloon Catheter</i>	<b>11</b>
<b>Ballon-Katheter</b> <i>Balloon Catheter</i>	<b>12</b>
<b>Punktions- und Wechsel-Set mit Pigtail</b> <i>Puncture and Exchange Set with Pigtail</i>	<b>14</b>



# URO<sup>MED</sup> CYST<sup>®</sup> »INTEGRAL«

## REF 3020 / 3025

### Ballon-Katheter Punktions-Set (BKS)

Stärker muss eine Kanüle für einen  
12 Charrière-Katheter nicht sein!

### *Balloon Catheter Puncture Set*

*It is unnecessary to use a stronger  
cannula for a 12 Charrière catheter!*

### Punktions-Set zur suprapubischen Blasendrainage

- Kanüle mit Spezialschliff
- leicht spaltbare Kanüle
- hohe Passgenauigkeit des »INTEGRAL«  
Katheters mit Spaltkanüle
- Ballon-Katheter aus Silikon
- kurze, atraumatische Spitze mit  
abgerundeter Kante
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Ballon

### *Puncture Set for suprapubic drainage of the urinary bladder*

- *cannula with special cut*
- *easy to split cannula*
- *high matching accuracy of »INTEGRAL«  
catheter with split cannula*
- *balloon catheter made of silicone*
- *short, atraumatic tip with  
rounded edge*
- *x-ray marker*
- *soft balloon*



### REF 2955

SUPRA-KATH »INTEGRAL«  
Länge 43 cm  
SUPRA-KATH »INTEGRAL«  
length 43 cm

Spaltkanüle  
Punktionslänge 12 cm  
(Abbildung in Originalgröße)  
*split cannula  
puncture length 12 cm  
(illustration in original size)*

Katheterstopfen  
*catheter plug*

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	Spaltkanüle Split Cannula	PZN PZN
3020	Ch. 12	5 ml	Ch. 15,0 / 5,0 mm	07198494
3025	Ch. 14	5 ml	Ch. 16,8 / 5,6 mm	07198502

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

# URO<sup>MED</sup> CYST<sup>®</sup> »INTEGRAL«

**REF 3021/3026/3027**

**Ballon-Katheter  
Wechsel-Set (WS-BK)**

*Balloon Catheter  
Exchange Set*

**Wechsel-Set zur suprapubischen  
Blasendrainage**

»INTEGRAL« Ballon-Katheter mit überganglos eingearbeitetem Ballon gewähren weitgehend einen schmerzfreien Katheterwechsel und erleichtern die Überwindung der Fascie.

- kurze, atraumatische Spitze mit abgerundeter Kante
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Ballon
- Silikon
- Wechseldraht mit flexibler Spitze
- führungstabil durch extrafeste Wicklung

**Exchange Set for suprapubic drainage  
of the urinary bladder**

»INTEGRAL« balloon catheters with integrated flat balloon allow to a great extent a painless change of the catheter and make it easier to pass the fascia.

- short, atraumatic tip with rounded edge
- x-ray marker
- soft balloon
- silicone
- guidewire with flexible tip
- stable guidance by extra strong winding



**REF 2955**

SUPRA-KATH »INTEGRAL«  
Länge 43 cm

*SUPRA-KATH »INTEGRAL«  
length 43 cm*

**REF 2967**

Suprapubischer Wechseldraht  
*suprapubic guidewire*

Katheterstopfen  
*catheter plug*

REF <i>REF</i>	Größen <i>Sizes</i>	Ballon <i>Balloon</i>	Wechseldraht <i>Guidewire</i>	PZN <i>PZN</i>
3021-12	Ch. 12	5 ml	0,038" / 80 cm	07198519
3026-14	Ch. 14	5 ml	0,038" / 80 cm	07198525
3027-16	Ch. 16	5 ml	0,038" / 80 cm	02557936
3027-18	Ch. 18	5 ml	0,038" / 80 cm	02927310
3027-20	Ch. 20	5 ml	0,038" / 80 cm	02927327

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

## REF 3010

### Ballon-Katheter Punktions-Set (BKS)


#### *Balloon Catheter Puncture Set*

### Punktions-Set zur suprapubischen Blasendrainage

- Kanüle mit Spezialschliff
- leicht spaltbare Kanüle
- Ballon-Katheter aus Silikon
- kurze, atraumatische Spitze mit abgerundeter Kante
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Ballon

### *Puncture Set for suprapubic drainage of the urinary bladder*

- *cannula with special cut*
- *easy to split cannula*
- *balloon catheter made of silicone*
- *short, atraumatic tip with rounded edge*
- *x-ray marker*
- *soft balloon*

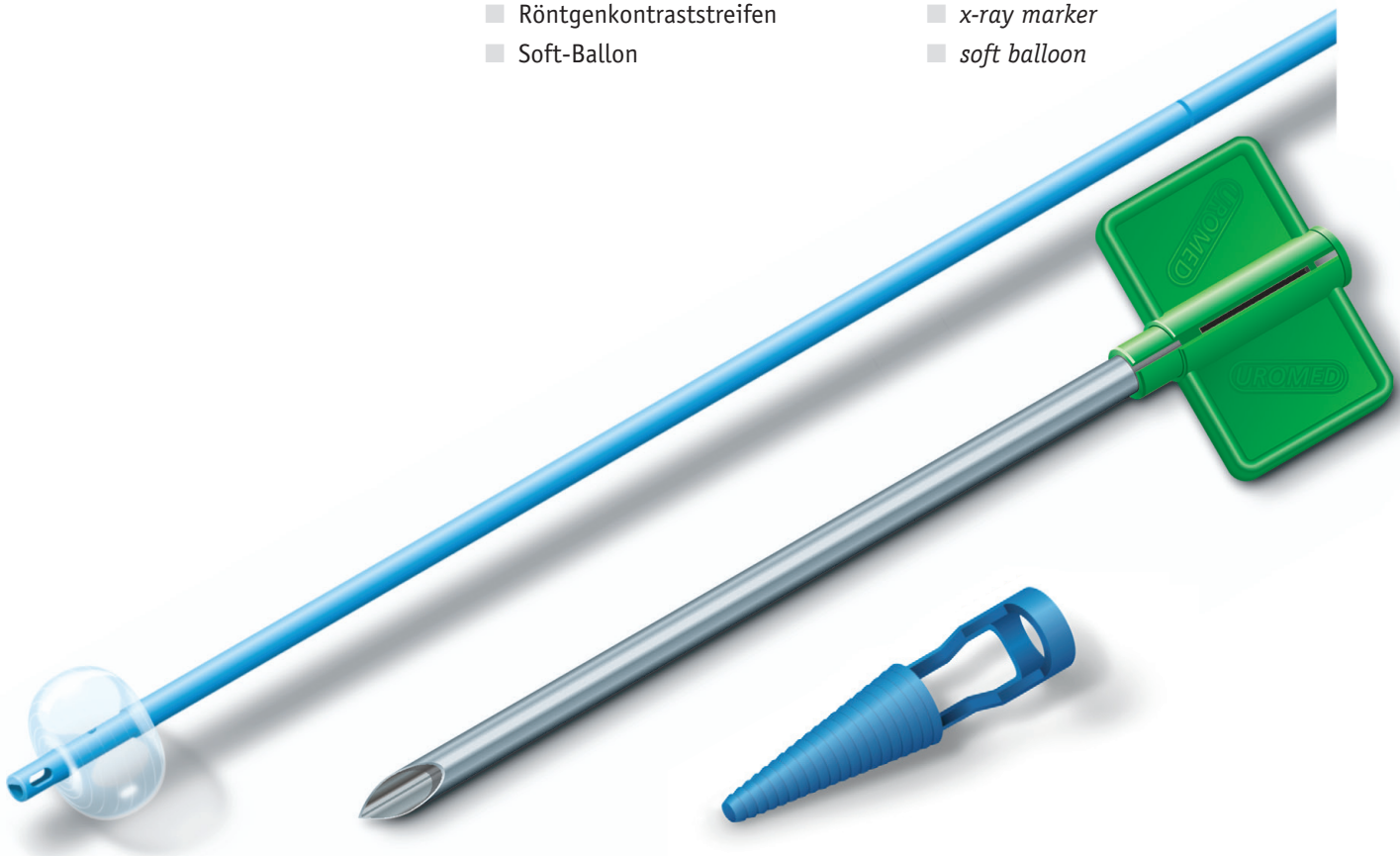

## REF 2956

Suprapubischer Ballon-Katheter  
Länge 43 cm  
*suprapubic balloon catheter  
length 43 cm*

Spaltkanüle Ch. 16,8  
Punktionslänge 12 cm  
(Abbildung in Originalgröße)  
*split cannula Ch. 16,8  
puncture length 12 cm  
(illustration in original size)*

Katheterstopfen  
*catheter plug*

REF <i>REF</i>	Größe <i>Size</i>	Ballon <i>Balloon</i>	Spaltkanüle <i>Split Cannula</i>	PZN <i>PZN</i>
3010	Ch. 12	5 ml	Ch. 16,8 / 5,6 mm	04742000

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

## REF 3015

### Ballon-Katheter Wechsel-Set (WS-BK)


#### *Ballon Catheter Exchange Set*

### Wechsel-Set zur suprapubischen Blasendrainage

- Ballon-Katheter aus Silikon
- kurze, atraumatische Spitze mit abgerundeter Kante
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Ballon
- Wechseldraht mit flexibler Spitze
- führungsstabil durch extrafeste Wicklung

### *Exchange Set for suprapubic drainage of the urinary bladder*

- *balloon catheter made of silicone*
- *short, atraumatic tip with rounded edge*
- *x-ray marker*
- *soft balloon*
- *guidewire with flexible tip*
- *stable guidance by extra strong winding*

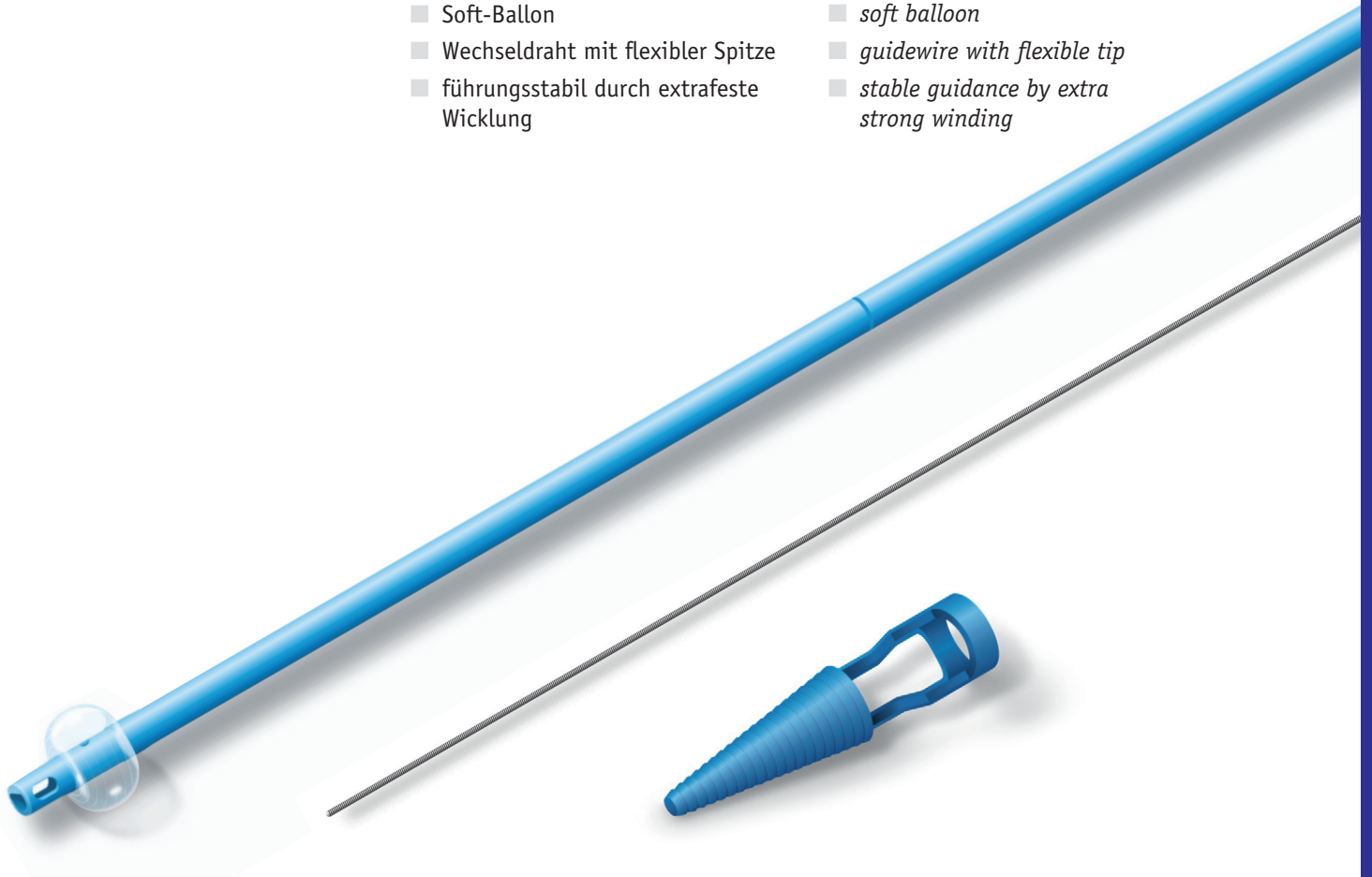

### REF 2956

Suprapubischer Ballon-Katheter  
Länge 43 cm  
*suprapubic balloon catheter  
length 43 cm*

### REF 2967

Suprapubischer Wechseldraht  
*suprapubic guidewire*

Katheterstopfen  
*catheter plug*

REF <i>REF</i>	Größe <i>Size</i>	Ballon <i>Balloon</i>	Wechseldraht <i>Guidewire</i>	PZN <i>PZN</i>
3015	Ch. 12	5 ml	0,038" / 80 cm	04742017

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces



# UROMED »SUPRAPUR®« PUNKTIONS-SET in SELDINGER-TECHNIK PUNCTURE SET IN SELDINGER-TECHNIQUE

REF 3047

Das neue suprapubische Punktions-Set in Seldinger-Technik für eine sichere, kontrollierte und komplikationsarme Erst-Punktion in Ch. 4!


*The new suprapubic puncture set in Seldinger-Technique for a safe and controlled initial puncture in Ch. 4 with less complication!*

## Suprapubisches Punktions-Set

- geringes Komplikationsrisiko durch Erst-Punktion mit Ch. 4/17,5 GA Kanüle
- gute röntgenologische Darstellbarkeit von Punktionskanüle und Fascial-Dilatatoren
- geringe Gewebetraumatisierung durch 2-stufiges Bougieren mit Dilatatoren in Ch. 10 und 14 mit langer, konisch zulaufender Spitze
- gute Führbarkeit durch festen Lunderquist-Draht mit flexibler, gerader Spitze
- »INTEGRAL«-Ballon-Katheter mit dilatierender Spitze erleichtert das Überwinden der Fascie
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Ballon
- Silikon

## Suprapubic puncture set

- low risk of complication due to initial puncture with Ch. 4/17,5 GA cannula
- good radiographical visibility of puncture cannula and fascial dilators
- low tissue traumatization due to 2-step dilation with a long and conically shaped tip in Ch. 10 and 14
- easy handling due to a strong Lunderquist guidewire with flexible straight tip
- using an »INTEGRAL« balloon catheter with a dilating tip simplifies the fascia
- x-ray marker
- soft balloon
- silicone

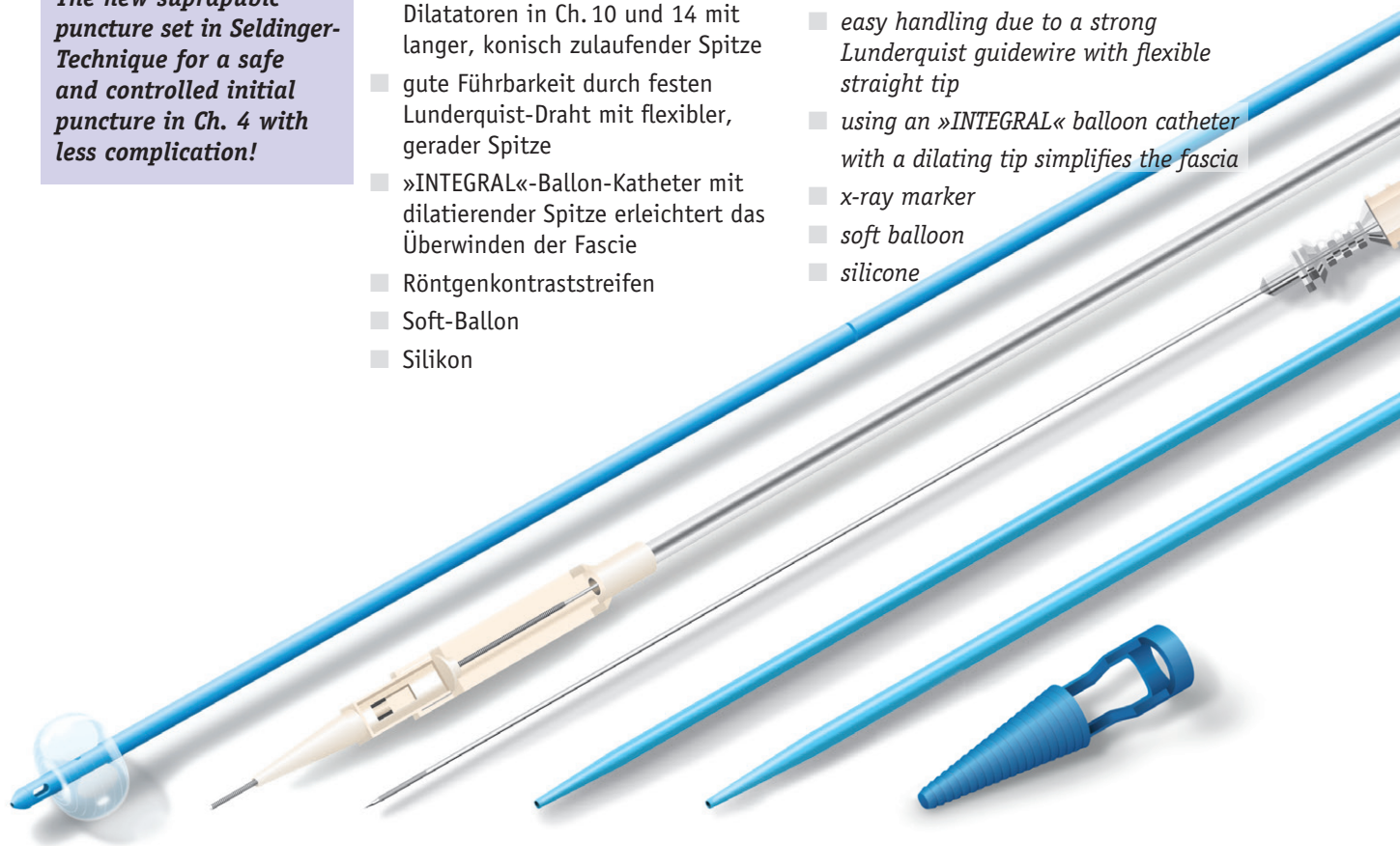

REF 3045.12

Dilatations-Ballon-Katheter »INTEGRAL« zylindrische Spitze, zentrale Bohrung, Länge 43 cm  
*dilation balloon catheter »INTEGRAL«, cylindrical tip, central open, length 43 cm*

Lunderquist Führungsdraht mit Einführhilfe, 0,035"/70 cm  
*Lunderquist guidewire with insertion guide, 0,035"/70 cm*

REF 2613

Punktionskanüle, 17,5 GA/1,3 mm, Stichlänge 18,5 cm  
*puncture cannula 17,5 GA/1,3 mm, needle length 18,5 cm*

REF 2650

Fascial-Dilatatoren Ch. 10/3,3 mm, Ch. 14/4,7 mm  
*Fascial dilators Ch. 10/3,3 mm, Ch. 14/4,7 mm*

Katheterstopfen  
*catheter plug*

REF REF	Größe Size	Ballon Balloon	PZN PZN
3047-12	Ch. 12	5 ml	10026124

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 5 Stück

Packing: double sterile  
Original carton: 5 pieces



# URO<sup>MED</sup> CYST<sup>®</sup> »INTEGRAL«

## REF 3046

### Dilatations-Ballon-Katheter Wechsel-Set (SDBK)

Dilatator und Ballon-Katheter in einem – Probleme bei der Überwindung enger Passagen und der Umstellung auf großlumige Ballon-Katheter werden mit diesem System gelöst.

### *Dilation Balloon Catheter Exchange Set*


*Dilator and balloon catheter in one – the system solves problems while passing tight areas or changing over to wide lumen balloon catheter.*

### Wechsel-Set zur suprapubischen Blasendrainage

- Ballon-Katheter mit dilatierender Spitze
- »INTEGRAL« Ausführung
- zentrale Bohrung für Führungsdraht
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Ballon
- Silikon
- Lunderquist Führungsdraht mit flexibler, gerader Spitze
- führungsstabil

### *Exchange Set for suprapubic drainage of the urinary bladder*

- *balloon catheter with dilating tip*
- *»INTEGRAL« version*
- *central open for guidewire*
- *x-ray marker*
- *soft balloon*
- *silicone*
- *Lunderquist guidewire with flexible, straight tip*
- *stable guidance*

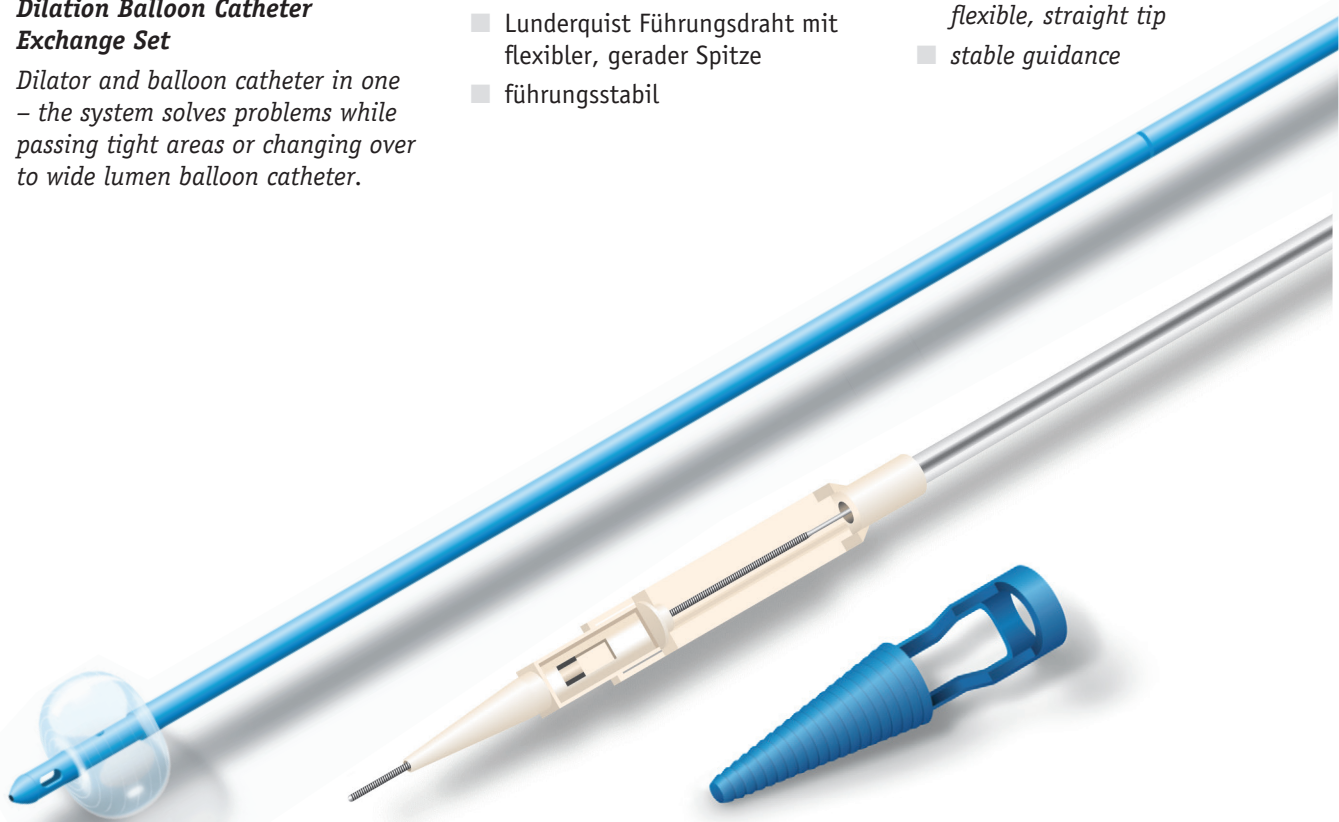

## REF 3045

Dilatations-Ballon-Katheter  
»INTEGRAL« zylindrische Spitze mit  
zentraler Bohrung, Länge 43 cm

*dilation balloon catheter  
»INTEGRAL« cylindrical tip,  
central open, length 43 cm*

Lunderquist Führungsdraht  
mit Einführhilfe

*Lunderquist guidewire  
with insertion guide*

Katheterstopfen  
*catheter plug*

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	Wechseldraht Guidewire	PZN PZN
3046-12	Ch. 12	5 ml	0,035" / 70 cm	04742069
3046-14	Ch. 14	8 ml	0,035" / 70 cm	04742075
3046-16	Ch. 16	8 ml	0,035" / 70 cm	04742081

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 5 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 5 pieces

# URO<sup>MED</sup> CYST<sup>®</sup> »INTEGRAL«

## DILATATIONS-BALLON-KATHETER

### DILATION BALLOON CATHETER

REF 3045

Zylindrische Spitze mit  
zentraler Bohrung  
2 Augen, Länge 43 cm

*Cylindrical Tip with  
central opening  
2 eyes, length 43 cm*

**Ballon-Katheter zur suprapubischen  
Blasendrainage**


»INTEGRAL« Ballon-Katheter mit über-  
gangslos eingearbeitetem Ballon  
gewähren weitgehend einen schmerz-  
freien Katheterwechsel und erleichtern  
die Überwindung der Fascie.

- dilatierende Spitze
- zentrale Bohrung für Führungsdraht
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Ballon
- Silikon
- fest

**Ballon Catheter for suprapubic  
drainage of the urinary bladder**

»INTEGRAL« balloon catheters with  
integrated flat balloon allow to a great  
extent a painless change of the catheter  
and make it easier to pass the fascia.

- dilating tip
- central open tip for guidewire
- x-ray marker
- soft balloon
- silicone
- solid

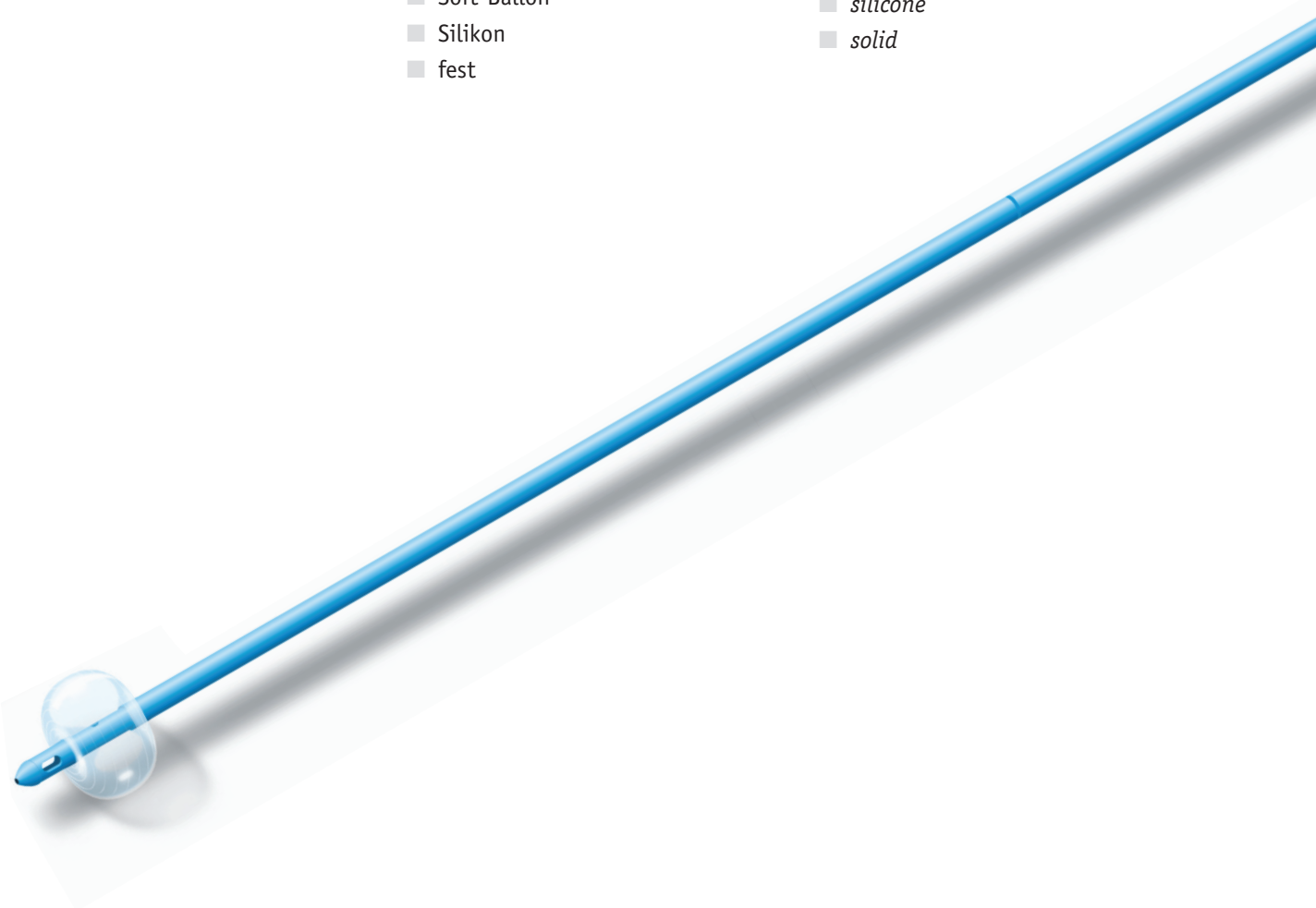

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
3045-12	Ch. 12	5 ml	04742023
3045-14	Ch. 14	8 ml	04742046
3045-16	Ch. 16	8 ml	04742052
3045-18	Ch. 18	10 ml	00051813
3045-20	Ch. 20	10 ml	00624120

Bitte beachten Sie auch das Punktions- und  
Wechsel-Set auf den Seiten 8 und 9.

*Please also note the puncture and exchange  
set on pages 8 and 9.*

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

# UROMED »SUPRASOFT« DOPPEL-BALLON-KATHETER DOUBLE BALLOON CATHETER

REF 2960

Ohne Spitze, zentral offen  
1 Auge, Länge 36 cm

*Without Tip, central open  
1 eye, length 36 cm*

## Doppel-Ballon-Katheter zur suprapubischen Blasendrainage


Der vordere Ballon des von Prof. Walz entwickelten Katheters verhindert durch die große Auflagefläche Irritationen an der Blasenwand und bietet sich damit für den Einsatz bei sensiblen Patienten an. Die Drainage erfolgt durch das Auge zwischen den Ballons.

- besonders geeignet bei Tenesmen
- Blockung beider Ballons über einen Kanal
- großlumig
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Balloons
- Silikon
- halbfest

## Double Balloon Catheter for suprapubic drainage of the urinary bladder

*The catheter, developed by Prof. Walz, with a large contact surface of the distal balloon prevents irritations of the bladder wall and is destined for sensible patients. The drainage will be effected through the eye between the balloons.*

- *without tip*
- *especially for tenesmen*
- *both balloons to be blocked by using one channel*
- *wide lumen*
- *x-ray marker*
- *soft balloons*
- *silicone*
- *semi-solid*

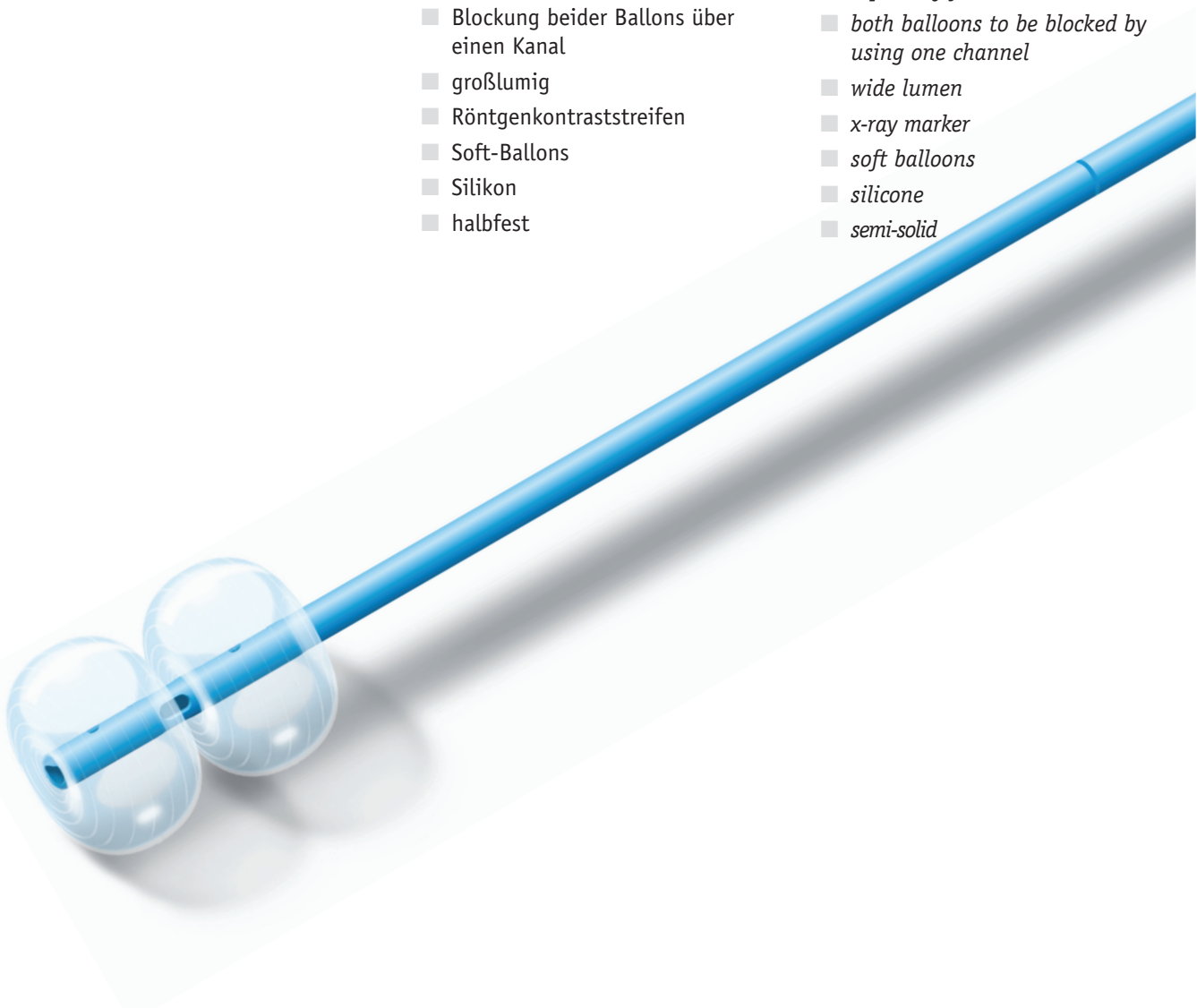

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2960-14	Ch. 14	15-20 ml	04741880
2960-18	Ch. 18	15-20 ml	04741897

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces

# UROMED SUPRA-KATH »INTEGRAL«

## REF 2955/2965

Kurze, zentral offene Spitze  
2 Augen

*Short, central open Tip  
2 eyes*

### Ballon-Katheter zur suprapubischen Blasendrainage


»INTEGRAL« Ballon-Katheter mit über-  
gangslos eingearbeitetem Ballon  
gewähren weitgehend einen schmerz-  
freien Katheterwechsel und erleichtern  
die Überwindung der Fascie.

- kurze, atraumatische Spitze mit abgerundeter Kante
- Röntgenkontraststreifen
- flache Ballonform
- Soft-Ballon
- Silikon
- halbfest

### *Balloon Catheter for suprapubic drainage of the urinary bladder*

*»INTEGRAL« balloon catheters with  
integrated flat balloon allow to a great  
extent a painless change of the catheter  
and make it easier to pass the fascia.*

- *short, atraumatic tip  
with rounded edge*
- *x-ray marker*
- *flat shape of balloon*
- *soft balloon*
- *silicone*
- *semi-solid*

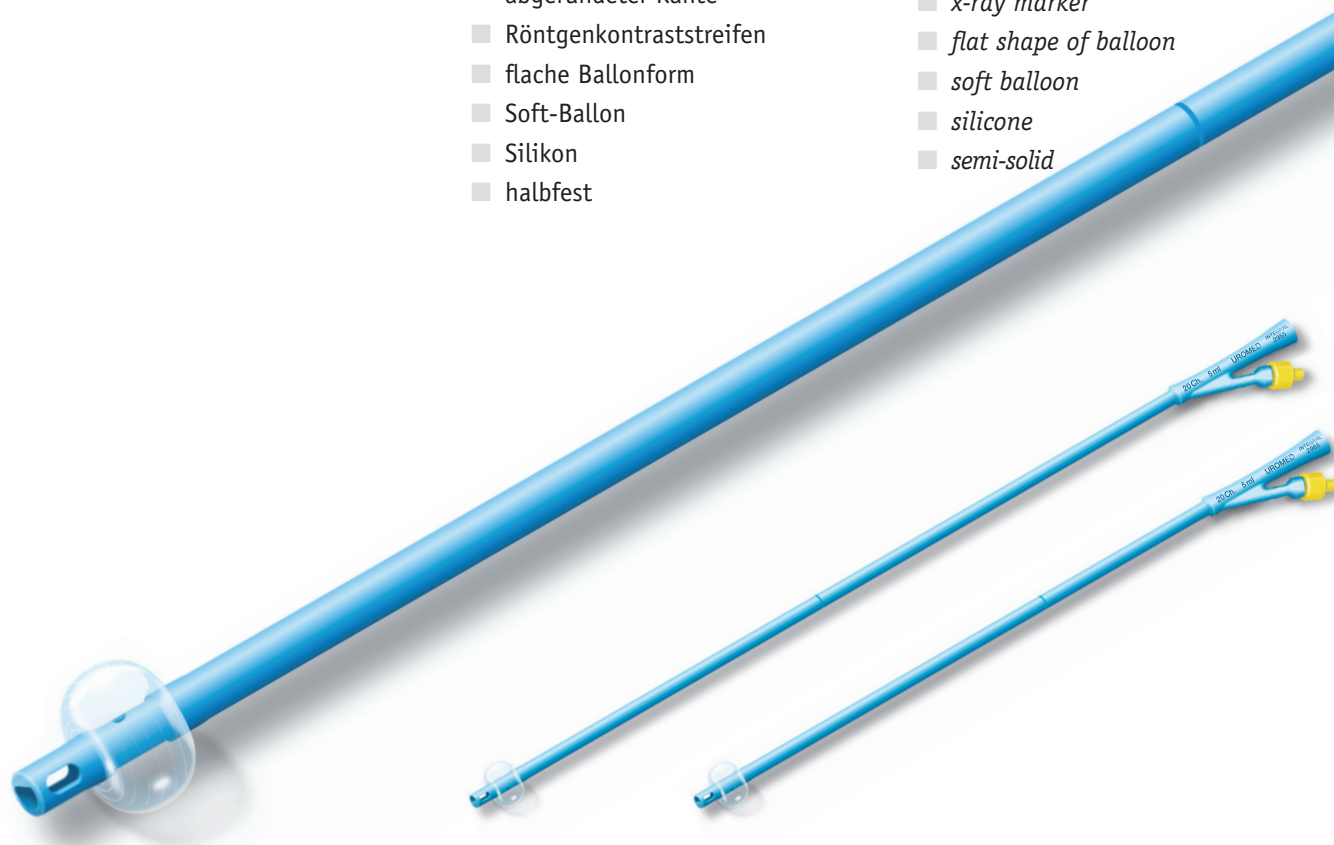

#### REF 2955

Länge 43 cm  
*length 43 cm*

#### REF 2965

Länge 33 cm  
*length 33 cm*

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2955-12	Ch. 12	5 ml	00051664
2955-14	Ch. 14	5 ml	00051670
2955-16	Ch. 16	5 ml	00051687
2955-18	Ch. 18	5 ml	00051701
2955-20	Ch. 20	5 ml	00051718
2955-22	Ch. 22	5 ml	00150248
2955-24	Ch. 24	5 ml	00154393

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2965-12	Ch. 12	5 ml	04741905
2965-14	Ch. 14	5 ml	04741911
2965-16	Ch. 16	5 ml	04741928
2965-18	Ch. 18	5 ml	04741934
2965-20	Ch. 20	5 ml	04741940
2965-22	Ch. 22	5 ml	00161068
2965-24	Ch. 24	5 ml	00161074

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces



# UROMED SUPRAPUBISCHER BALLON-KATHETER

## SUPRAPUBIC BALLOON CATHETER

### REF 2956/2966

Kurze, zentral offene Spitze  
2 Augen


*Short, central open Tip  
2 eyes*

**Ballon-Katheter zur suprapubischen  
Blasendrainage**

- kurze, atraumatische Spitze mit abgerundeter Kante
- flache Ballonform
- großlumig
- Soft-Ballon
- Silikon
- weich

**Ballon Catheter for suprapubic  
drainage of the urinary bladder**

- *short, atraumatic tip with rounded edge*
- *flat shape of balloon*
- *wide lumen*
- *soft balloon*
- *silicone*
- *soft*

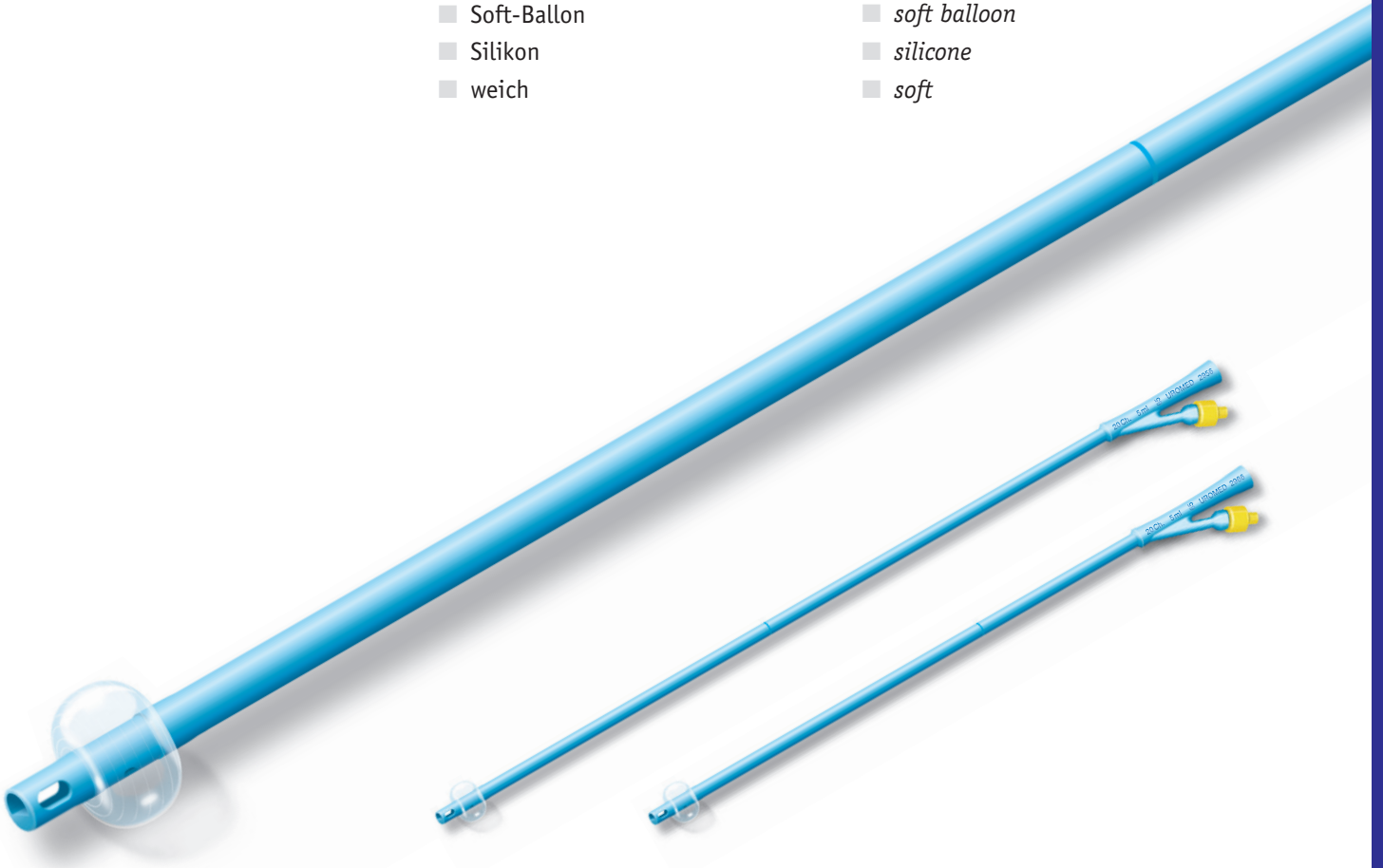

**REF 2956**  
Länge 43 cm  
*length 43 cm*

**REF 2966**  
Länge 33 cm  
*length 33 cm*

REF <i>REF</i>	Größen <i>Sizes</i>	Ballon <i>Balloon</i>	PZN <i>PZN</i>
2956-10	Ch. 10	2 ml	00051724
2956-12	Ch. 12	5 ml	00051730
2956-14	Ch. 14	5 ml	00051747
2956-16	Ch. 16	5 ml	00051753
2956-18	Ch. 18	5 ml	00051776
2956-20	Ch. 20	5 ml	00051807
2956-22	Ch. 22	5 ml	02784388
2956-24	Ch. 24	5 ml	02784394

REF <i>REF</i>	Größen <i>Sizes</i>	Ballon <i>Balloon</i>	PZN <i>PZN</i>
2966-10	Ch. 10	2 ml	07654443
2966-12	Ch. 12	5 ml	04741957
2966-14	Ch. 14	5 ml	03281465
2966-16	Ch. 16	5 ml	04741963
2966-18	Ch. 18	5 ml	04741986
2966-20	Ch. 20	5 ml	04741992
2966-22	Ch. 22	5 ml	02784402
2966-24	Ch. 24	5 ml	02784431

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

# UROMED PIGTAIL-SET

## REF 3040/3041

**Ballon-Katheter  
Punktions-Set (BKS-P) und  
Wechsel-Set (WS-BK-P)**


*Balloon Catheter  
Puncture Set and  
Exchange Set*

**Punktions-Set (BKS-P) zur  
suprapubischen Blasendrainage**

- Kanüle mit Spezialschliff
- leicht spaltbare Kanüle
- Ballon-Katheter aus Silikon
- Pigtailspitze mit innenliegenden Augen
- transparent
- Röntgenkontraststreifen

**Puncture Set (BKS-P) for suprapubic  
drainage of the urinary bladder**

- cannula with special cut
- easy to split cannula
- balloon catheter made of silicone
- pigtail tip with eyes inside the ring
- transparent
- x-ray marker

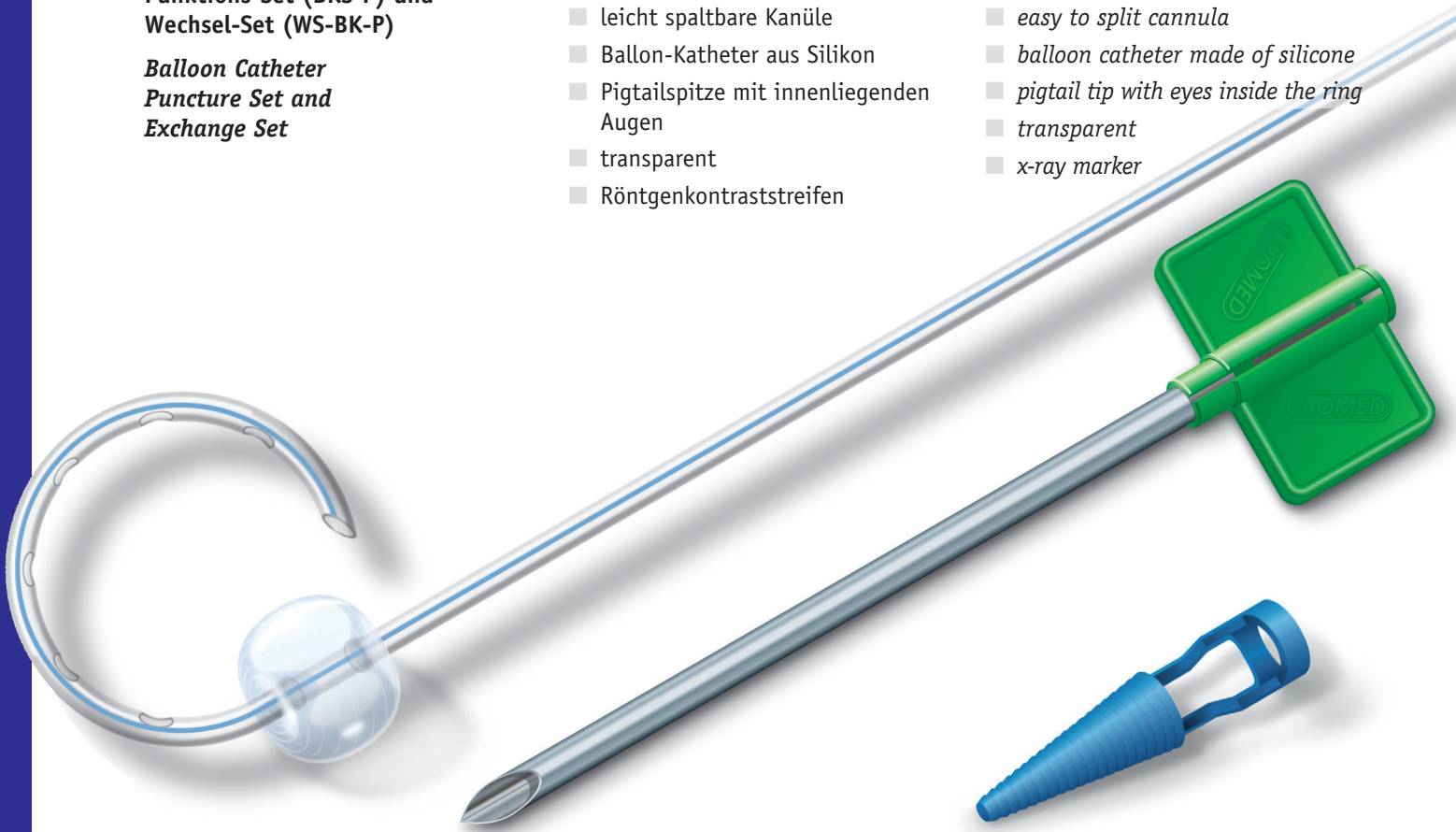

Suprapubischer Ballon-Katheter  
Pigtailspitze mit 6 Augen, Länge 52,5 cm  
*suprapubic balloon catheter  
pigtail tip with 6 eyes, length 52,5 cm*

Spaltkanüle Ch. 16,8, Punktionslänge 12 cm  
(Abbildung in Originalgröße)  
*split cannula Ch. 16,8, puncture length 12 cm  
(illustration in original size)*

Katheterstopfen  
*catheter plug*

### Punktions-Set / Puncture Set

REF	Größe	Ballon	Spaltkanüle	PZN
REF	Size	Balloon	Split Cannula	PZN
3040	Ch. 12	5 ml	Ch. 16,8 / 5,6 mm	00322175

### Wechsel-Set / Exchange Set

REF	Größen	Ballon	Wechseldraht	PZN
REF	Sizes	Balloon	Guidewire	PZN
3041-12	Ch. 12	5 ml	0,038" / 100 cm	00322181
3041-14	Ch. 14	5 ml	0,038" / 100 cm	00322198
3041-16	Ch. 16	5 ml	0,038" / 100 cm	00322206

**Wechsel-Set (WS-BK-P) zur  
suprapubischen Blasendrainage**

wie Punktions-Set REF 3040, jedoch  
anstatt Spaltkanüle

- Wechseldraht mit flexibler Spitze
- führungsstabil durch extrafeste  
Wicklung

**Exchange Set for suprapubic  
drainage of the urinary bladder**

as Puncture Set REF 3040,  
however instead of Split Cannula

- Guidewire with flexible tip
- guidance stability due to  
special strong winding

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces



**UROMED Kurt Drews KG**  
**Meessen 7/11**  
**D-22113 Oststeinbek**

<b>Telefon</b>	<b>Zentrale Kliniken Praxen Apotheken/Handel</b>	<b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 0</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 11</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 21</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 31</b>
----------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Telefax</b>		<b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 99</b>
----------------	--	----------------------------------

<b>Internet</b>		<b><a href="http://www.uromed.de">www.uromed.de</a></b>
-----------------	--	---------------------------------------------------------

<b>E-Mail</b>		<b><a href="mailto:service@uromed.de">service@uromed.de</a></b>
---------------	--	-----------------------------------------------------------------

Die Angaben entsprechen unserem  
Kenntnisstand bei Drucklegung.  
Produktänderungen aufgrund technischen  
Fortschrittes vorbehalten.

*All indications correspond to our know-  
ledge at the date of press.  
Due to technical progress all products are  
subject to change.*

Material-Nr. 0023 · Rev. 2 · 02/2022

© UROMED Kurt Drews KG

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE