

# Ureter-Dauerschienen »HYDROPUR®«


*Ureteral Stent*  
»HYDROPUR®«



**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

Zur Erleichterung der Auswahl beziehen sich unsere Längenangaben auf den ureteralen Bereich der Ureter-Dauerschienen ohne Pigtails.

*To facilitate the choice our data regarding the length relate to the ureteral part of the Ureteral Stents without pigtails.*

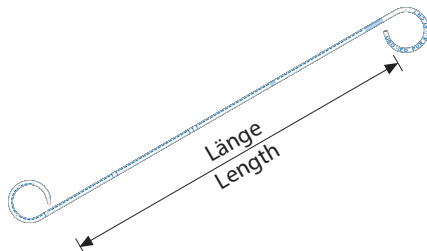

Charrière	Millimeter
4,8	1,6
6	2,0
7	2,3
8	2,7
9	3,0

# EDITORIAL



Die Ureter-Dauerschleife »HYDROPUR®« überzeugt durch ihre extreme Gleitfähigkeit, die Beständigkeit während ihrer Verweilzeit und das einfache Handling. Die Schleifen sind in fein abgestuften Größen erhältlich sowie als steuerbare Ausführung oder mit Pusher und Applikationsfaden.

Die Materialfestigkeit in Verbindung mit kleinen, tangential versetzten, atraumatischen Drainage-Augen ermöglicht eine komplikationsfreie Applikation. Die konisch angeformte Spitze des Nierenpigittails ermöglicht ein sehr gutes Vorschieben der Ureter-Dauerschleife.

## Unser Material

Aus gutem Grund haben wir uns bei der UROMED Ureter-Dauerschleife »HYDROPUR®« für aromatisches Polyurethan entschieden. Es erfüllt die hohen Anforderungen hinsichtlich Flexibilität, Zugfestigkeit und Formstabilität sowie gute Memory-Eigenschaften in idealer Weise. Eine Abrundung dieser Merkmale erfolgt durch die spezielle Fertigungstechnik und Vergütung der Oberfläche, die sich in einer sehr guten Gleitfähigkeit und geringer Inkrustationsneigung widerspiegeln.

Daher ist die UROMED Ureter-Dauerschleife »HYDROPUR®« für die Langzeitdrainage geeignet, wobei die individuelle Inkrustationsneigung des Patienten zu berücksichtigen ist.

*Our Ureteral Stent »HYDROPUR®« convinces by its high gliding ability, stability during the indwelling time and easy handling. The stents are available in finely graduated sizes as well as manoeuvrable versions or with pusher and application thread.*

*The rigidity of material in combination with small, tangentially placed, atraumatic eyes enables a complication-free placement. The dilating tip of the pigtail provides a good advancement of the stent.*

## Our Material

*With good reasons we have decided on aromatic polyurethane for the UROMED Ureteral Stent »HYDROPUR®«. This material ideally fulfills the high demands concerning flexibility, tensile strength, form stability and good memory effect. Additional to these features are the special manufacturing procedure and the refined surface which are reflected in an excellent ability of gliding and low incrustation rates.*

*Therefore the UROMED Ureteral Stent »HYDROPUR®« is suitable for long-term drainage but the individual incrustation rate of the patient has to be taken into consideration.*

# INHALT


## CONTENTS

<b>Editorial</b> <i>Editorial</i>	<b>3</b>
<b>Konnektionen</b> <i>Connections</i>	<b>5</b>
<b>Ureter-Dauerschienen für Seldinger-Technik</b> <i>Ureteral Stents for Seldinger-technique</i>	<b>6</b>
<b>Steuerbare Ureter-Dauerschienen</b> <i>Manoeuvrable Ureteral Stents</i>	<b>8</b>
<b>Ureter-Dauerschienen mit Spiralmandrin</b> <i>Ureteral Stents with Guidewire</i>	<b>10</b>
<b>Intra-operative Ureter-Dauerschienen</b> <i>Intra-Operative Ureteral Stents</i>	<b>11</b>
<b>Ureter-Dauerschienen zur externen Ableitung</b> <i>Ureteral Stents for External Diversion</i>	<b>12</b>
<b>UK-Quetschverbinder</b> <i>Compression Adapter</i>	<b>15</b>

# KONNEKTIONEN CONNECTIONS


Die »HYDROPUR®« Ureter Dauerschleife gibt es mit zwei unterschiedlichen Konnektionen

## Bei Ch. 4,8:

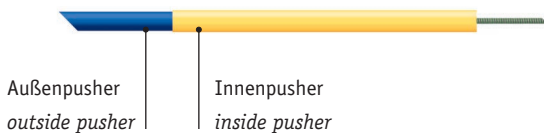

Die Ureter-Dauerschleife und das Pushersystem sind fest miteinander verbunden.  
*The ureteral stent and the pusher system are tightly connected.*

The »HYDROPUR®« Ureteral Stents are available with two different connections

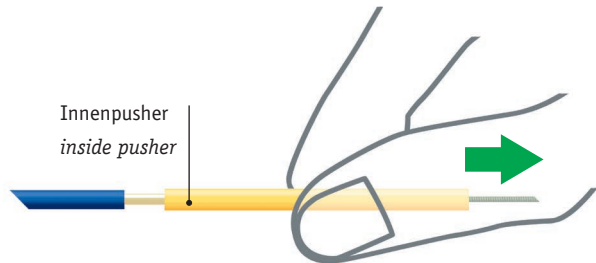

### LÖSEN DER VERBINDUNG:

Den gelben Innenpusher zurückziehen und gleichzeitig den blauen Außenpusher festhalten, damit sich die Schleife lösen kann.

### SEPARATION OF THE CONNECTION:

*Draw back the yellow inside pusher and hold on to the blue outside pusher at the same time to disconnect the stent.*


## Bei Ch. 6-9:

### FIXIEREN DES FÜHRUNGSDRAHTES

Die Ureter-Dauerschleife und das Pushersystem sind fest miteinander verbunden. Für eine Fixierung des Führungsdrahtes schließen Sie das Drehgewinde am äußersten Ende des Pushersystems.

### FIXING THE GUIDEWIRE

*The ureteral stent and the pusher system are tightly connected. For a fixation of the guidewire please close the rotation thread at the outer end of the pusher system.*

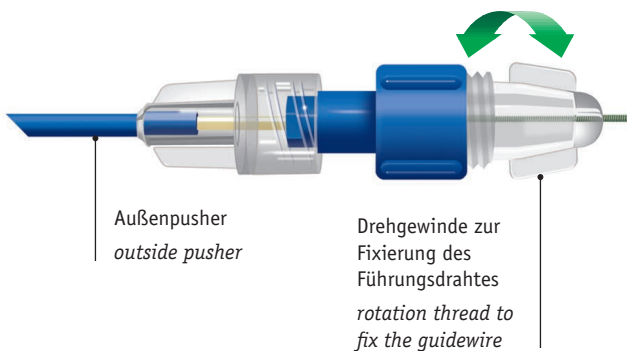


### LÖSEN DER VERBINDUNG ZWISCHEN DAUERSCHLEIFE UND PUSHERSYSTEM

Trennen der Konnektion, indem der blaue Konnektor, der mit dem gelben Innenpusher verbunden ist, abgeschraubt (1.) und zurückgezogen (2.) wird.


### DISCONNECTION BETWEEN STENT AND PUSHER SYSTEM

*Separation of the connection by unscrewing (1.) and drawing back (2.) the blue connector which is linked to the yellow inside pusher.*

#### 1. Blauen Konnektor zum Lösen nach links drehen

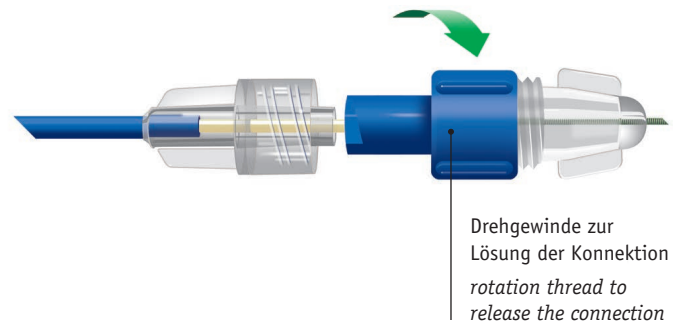

#### 2. Blauen Konnektor zurückziehen

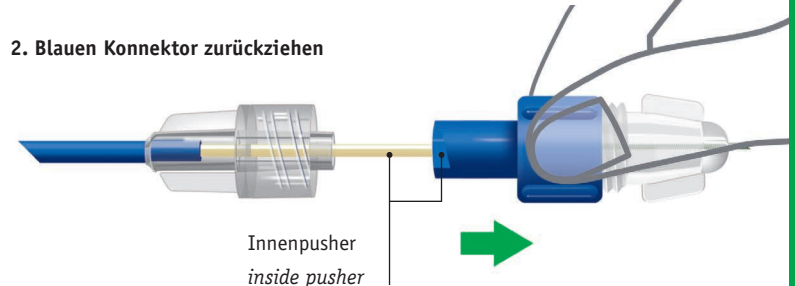

# UROMED »HYDROPUR®« SELDINGER-TECHNIK

## UROMED »HYDROPUR®« SELDINGER-TECHNIQUE

**REF 4445 – 4449**

**Zentral offene Spitze  
mit Perforation im Ureterteil**

**Open tip with perforation  
in the ureteral part**

**Katheter zur inneren  
Schiengung des Ureters**

- Set zur Applikation in Seldinger-Technik
- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- zur Langzeitanwendung geeignet
- gutes Vorschiebeverhalten durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleine, kreisrunde Pigtails
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- mit monofilem Applikationsfaden
- graduiert

**Catheter for the internal stenting  
of the ureter**

- set for application in Seldinger-technique
- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- suitable for long-term application
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtails
- atraumatic eyes
- overall radiopaque
- with monofilament application thread
- graduated

Ureter-Dauerschleife  
beidseitiger Pigtail  
*ureteral stent, double pigtail  
central open tip, with  
perforation in the ureteral part*

Nachschiebeschlauch  
Länge 45 cm bzw. 70 cm bei Ch. 4,8  
*pusher  
length 45 cm and 70 cm for Ch. 4,8*

Diese UROMED »HYDROPUR®« Dauerschleife können Sie mit einem Führungsdraht Ihrer Wahl einsetzen: für Dauerschleifen in Ch. 4,8 – Führungsdraht in 0,028", für Dauerschleifen in Ch. 6-9 – Führungsdraht in 0,035".

*This UROMED »HYDROPUR®« can be used with a guidewire of your choice: for stents Ch. 4,8 – guidewire 0,028", for stents Ch. 6-9 – guidewire 0,035".*

Unmittelbar nach Positionierung der Ureter-Dauerschleife ist der Applikationsfaden zu entfernen.

*Right after positioning of the ureteral stent the application thread has to be removed.*

REF REF	Dauerschleife Stent	PZN PZN
4445-24	Ch. 4,8 / 24 cm	11371225
4445-26	Ch. 4,8 / 26 cm	11371231
4445-28	Ch. 4,8 / 28 cm	11371248
4446-24	Ch. 6,0 / 24 cm	11371254
4446-26	Ch. 6,0 / 26 cm	11371260
4446-28	Ch. 6,0 / 28 cm	11371277
4446-30	Ch. 6,0 / 30 cm	11371283

REF REF	Dauerschleife Stent	PZN PZN
4447-24	Ch. 7,0 / 24 cm	11371308
4447-26	Ch. 7,0 / 26 cm	11371314
4447-28	Ch. 7,0 / 28 cm	11371320
4447-30	Ch. 7,0 / 30 cm	11371337
4448-26	Ch. 8,0 / 26 cm	11371343
4448-28	Ch. 8,0 / 28 cm	11371372
4448-30	Ch. 8,0 / 30 cm	11371389
4449-26	Ch. 9,0 / 26 cm	11371395
4449-28	Ch. 9,0 / 28 cm	11371426
4449-30	Ch. 9,0 / 30 cm	11371432

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

# UROMED »HYDROPUR®« SELDINGER-TECHNIK

## UROMED »HYDROPUR®« SELDINGER-TECHNIQUE

### REF 4455 – 4458

Zentral offene Spitze  
ohne Perforation im Ureterteil  
*Open tip without perforation  
in the ureteral part*

### Katheter zur inneren Schienung des Ureters

- Set zur Applikation in Seldinger-Technik
- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- zur Langzeitanwendung geeignet
- gutes Vorschiebeverhalten durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleine, kreisrunde Pigtails
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- mit monofilem Applikationsfaden
- graduiert

### Catheter for the internal stenting of the ureter

- set for application in Seldinger-technique
- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- suitable for long-term application
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtails
- atraumatic eyes
- overall radiopaque
- with monofilament application thread
- graduated

Ureter-Dauerschienen  
beidseitiger Pigtail

*ureteral stent, double pigtail  
central open tip, without  
perforation in the ureteral part*

Nachschiebeschlauch  
Länge 45 cm bzw. 70 cm bei Ch. 4,8

*pusher  
length 45 cm and 70 cm for Ch. 4,8*

Diese UROMED »HYDROPUR®« Dauerschienen können Sie mit einem Führungsdraht Ihrer Wahl einsetzen: für Dauerschienen in Ch. 4,8 – Führungsdraht in 0,028", für Dauerschienen in Ch. 6-8 – Führungsdraht in 0,035".

*This UROMED »HYDROPUR®« can be used with a guidewire of your choice: for stents Ch. 4,8 – guidewire 0,028", for stents Ch. 6-8 – guidewire 0,035".*

Unmittelbar nach Positionierung der Ureter-Dauerschienen ist der Applikationsfaden zu entfernen.

*Right after positioning of the ureteral stent the application thread has to be removed.*

REF REF	Dauerschienen Stent	PZN PZN
4455-24	Ch. 4,8 / 24 cm	11371449
4455-26	Ch. 4,8 / 26 cm	11371455
4455-28	Ch. 4,8 / 28 cm	11371461
4456-24	Ch. 6,0 / 24 cm	11371478
4456-26	Ch. 6,0 / 26 cm	11371484
4456-28	Ch. 6,0 / 28 cm	11371490
4456-30	Ch. 6,0 / 30 cm	11371509

REF REF	Dauerschienen Stent	PZN PZN
4457-26	Ch. 7,0 / 26 cm	11371515
4457-28	Ch. 7,0 / 28 cm	11371521
4457-30	Ch. 7,0 / 30 cm	11371538
4458-26	Ch. 8,0 / 26 cm	11371544
4458-28	Ch. 8,0 / 28 cm	11371550
4458-30	Ch. 8,0 / 30 cm	11371567

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces

# UROMED »HYDROPUR®« STEUERBAR

## UROMED »HYDROPUR®« MANOEUVRABLE

REF 4435 – 4439

Zentral offene Spitze  
mit Perforation im Ureterteil

*Open tip with perforation  
in the ureteral part*

Diese UROMED »HYDROPUR®« Dauerschienen können Sie mit einem Führungsdraht Ihrer Wahl einsetzen: für Dauerschienen in Ch. 4,8 – Führungsdraht in 0,028", für Dauerschienen in Ch. 6-9 – Führungsdraht in 0,035".

*This UROMED »HYDROPUR®« can be used with a guidewire of your choice: for stents Ch. 4,8 – guidewire 0,028", for stents Ch. 6-9 – guidewire 0,035".*

Katheter zur inneren  
Schienung des Ureters

Für die ureterorenoskopische Anwendung ist die Ureter-Dauerschiene in Ch. 4,8 vorgesehen.

- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- zur Langzeitanwendung geeignet
- gutes Vorschiebehaviorn durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleine, kreisrunde Pigtails
- atraumatische Augen
- Pushersystem und Schiene vormontiert
- röntgenologisch darstellbar
- mit monofilament Applikationsfaden
- graduiert
- steuerbar

*Catheter for the internal stenting  
of the ureter*

*The ureteral stent in Ch. 4,8 is destined for ureterorenoscopic application.*

- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- suitable for long-term application
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtails
- atraumatic eyes
- pusher system and stent pre-assembled
- overall radiopaque
- with monofilament application thread
- graduated
- manoeuvrable

Ureter-Dauerschiene  
beidseitiger Pigtail

*ureteral stent, double pigtail  
central open tip, with perforation  
in the ureteral part*

Ch. 6-Ch. 9  
Pushersystem  
Länge 45 cm

*Ch. 6-Ch. 9  
pusher system  
length 45 cm*

Ch. 4,8  
Pushersystem  
Länge 70 cm

*Ch. 4,8  
pusher system  
length 70 cm*

1 Fixierklemme bei REF 4435  
*1 fixing clamp for REF 4435*

REF REF	Dauerschiene Stent	PZN PZN
4435-24*	Ch. 4,8 / 24 cm	11371900
4435-26*	Ch. 4,8 / 26 cm	11371917
4435-28	Ch. 4,8 / 28 cm	11371923
4435-30*	Ch. 4,8 / 30 cm	11371952
4436-24	Ch. 6,0 / 24 cm	11371969
4436-26	Ch. 6,0 / 26 cm	11371975
4436-28	Ch. 6,0 / 28 cm	11371981
4436-30	Ch. 6,0 / 30 cm	11371998

\* Aktuell ohne monofilament Applikationsfaden.  
Umstellung erfolgt in Kürze.

REF REF	Dauerschiene Stent	PZN PZN
4437-24	Ch. 7,0 / 24 cm	11372006
4437-26	Ch. 7,0 / 26 cm	11372012
4437-28	Ch. 7,0 / 28 cm	11372029
4437-30	Ch. 7,0 / 30 cm	11372041
4438-26	Ch. 8,0 / 26 cm	11372058
4438-28	Ch. 8,0 / 28 cm	11372064
4438-30*	Ch. 8,0 / 30 cm	11372070
4439-26	Ch. 9,0 / 26 cm	11372087
4439-28	Ch. 9,0 / 28 cm	11372093
4439-30*	Ch. 9,0 / 30 cm	11372101

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces



# UROMED »HYDROPUR®« STEUERBAR

## UROMED »HYDROPUR®« MANOEUVRABLE

REF 4485 – 4488

Zylindrische Spitze  
mit Perforation im Ureterteil  
*Closed tip with perforation  
in the ureteral part*

Katheter zur inneren  
Schienung des Ureters

Für die ureterorenoskopische  
Anwendung ist die Ureter-  
Dauerschleife in Ch. 4,8 vorgesehen.

- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- zur Langzeitanwendung geeignet
- gutes Vorschiebehavior durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleine, kreisrunde Pigtails
- atraumatische Augen
- vormontiertes Set zur einfachen Handhabung
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- steuerbar

*Catheter for the internal stenting  
of the ureter*

*The ureteral stent in Ch. 4,8 is destined  
for ureterorenoscopic application.*

- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- suitable for long-term application
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtails
- atraumatic eyes
- pre-assembled set for easy handling
- overall radiopaque
- graduated
- manoeuvrable



Ureter-Dauerschleife  
beidseitiger Pigtail

*ureteral stent, double pigtail  
cylindrical tip, with perforation  
in the ureteral part*

Ch. 6-Ch. 8  
Pushersystem  
Länge 45 cm

*Ch. 6-Ch. 8  
pusher system  
length 45 cm*

Ch. 4,8  
Pushersystem  
Länge 70 cm

*Ch. 4,8  
pusher system  
length 70 cm*

Spiralmandrin  
PTFE-beschichtet  
guidewire  
PTFE coated

1 Fixierklemme bei REF 4485  
1 fixing clamp for REF 4485

REF REF	Dauerschleife Stent	Mandrin Guidewire	PZN PZN
4485 - 24	Ch. 4,8 / 24 cm	0,028" / 150 cm	11371739
4485 - 26	Ch. 4,8 / 26 cm	0,028" / 150 cm	11371745
4485 - 28	Ch. 4,8 / 28 cm	0,028" / 150 cm	11371751
4485 - 30	Ch. 4,8 / 30 cm	0,028" / 150 cm	11371768
4486 - 24	Ch. 6,0 / 24 cm	0,035" / 100 cm	11371774
4486 - 26	Ch. 6,0 / 26 cm	0,035" / 100 cm	11371780
4486 - 28	Ch. 6,0 / 28 cm	0,035" / 100 cm	11371797
4486 - 30	Ch. 6,0 / 30 cm	0,035" / 100 cm	11371805

REF REF	Dauerschleife Stent	Mandrin Guidewire	PZN PZN
4487 - 24	Ch. 7,0 / 24 cm	0,035" / 100 cm	11371811
4487 - 26	Ch. 7,0 / 26 cm	0,035" / 100 cm	11371828
4487 - 28	Ch. 7,0 / 28 cm	0,035" / 100 cm	11371834
4487 - 30	Ch. 7,0 / 30 cm	0,035" / 100 cm	11371840
4488 - 26	Ch. 8,0 / 26 cm	0,038" / 100 cm	11371857
4488 - 28	Ch. 8,0 / 28 cm	0,038" / 100 cm	11371863
4488 - 30	Ch. 8,0 / 30 cm	0,038" / 100 cm	11371886

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

# UROMED »HYDROPUR®«

## UROMED »HYDROPUR®«

REF 4405 – 4409

**Zylindrische Spitze  
mit Perforation im Ureterteil**  
*Closed tip with perforation  
in the ureteral part*

**Katheter zur inneren  
Schiengung des Ureters**


Für die ureterorenoskopische  
Anwendung ist die Ureter-  
Dauerschleife in Ch. 4,8 vorgesehen.

- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- zur Langzeitanwendung geeignet
- gutes Vorschiebehavior durch  
mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleine, kreisrunde Pigtails
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- mit monofilament Applikationsfaden
- graduiert

**Catheter for the internal stenting  
of the ureter**

*The ureteral stent in Ch. 4,8 is destined  
for ureterorenoscopic application.*

- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- suitable for long-term application
- good advancement control because  
of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular  
pigtails
- atraumatic eyes
- overall radiopaque
- with monofilament  
application thread
- graduated

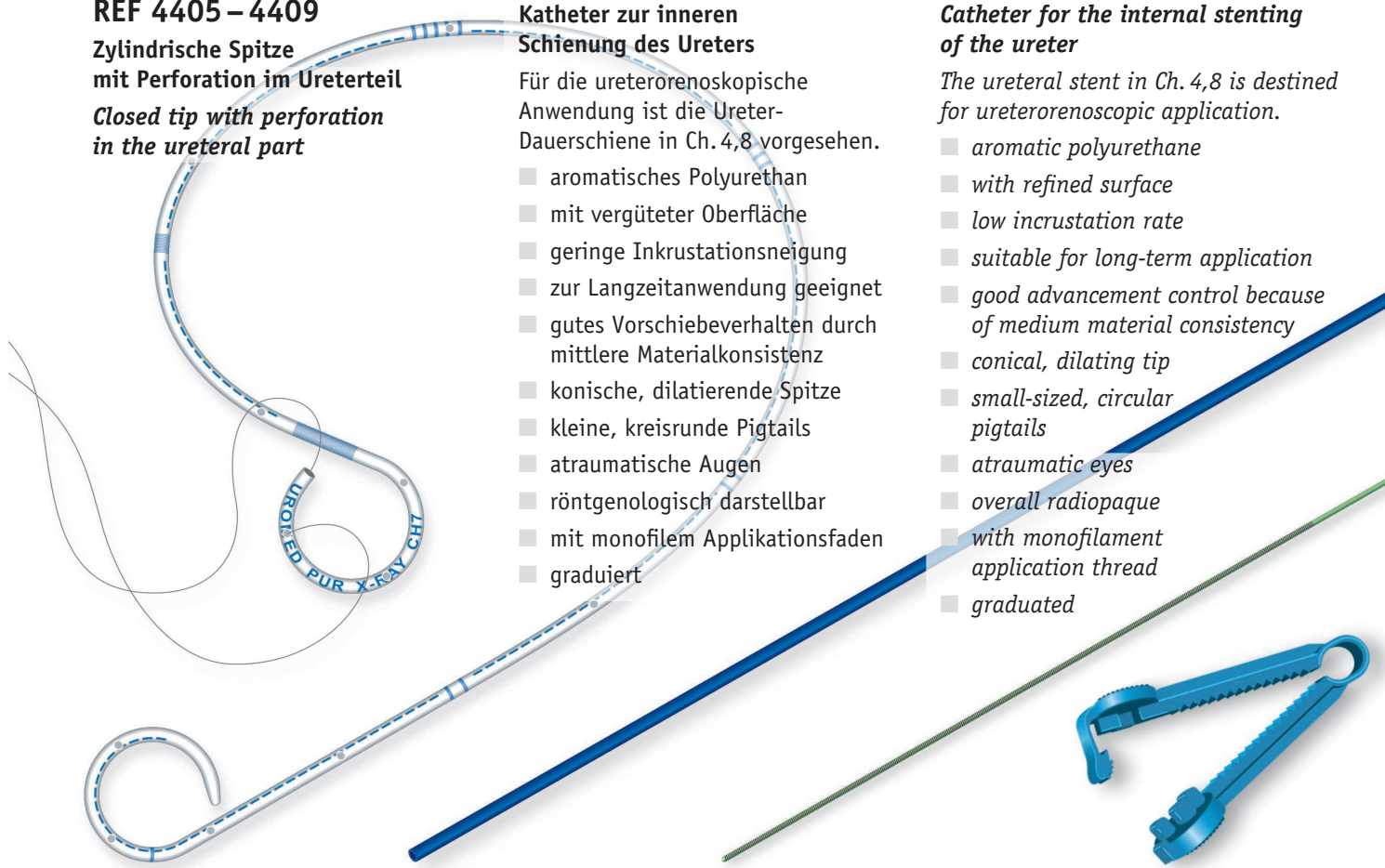

Ureter-Dauerschleife  
beidseitiger Pigtail

*ureteral stent, double pigtail  
cylindrical tip, with perforation  
in the ureteral part*

Nachschiebeschlauch

Länge 45 cm bzw. 70 cm bei Ch. 4,8

*pusher  
length 45 cm and 70 cm for Ch. 4,8*

Spiralmandrin

PTFE-beschichtet

*guidewire  
PTFE coated*

2 Fixierklammern

2 fixing clamps

Unmittelbar nach Positionierung der Ureter-Dauerschleife ist der  
Applikationsfaden zu entfernen.

*Right after positioning of the ureteral stent the application thread  
has to be removed.*

REF REF	Dauerschleife Stent	Mandrin Guidewire	PZN PZN
4405-24	Ch. 4,8/24 cm	0,028"/150 cm	11370964
4405-26	Ch. 4,8/26 cm	0,028"/150 cm	11370993
4405-28	Ch. 4,8/28 cm	0,028"/150 cm	11371001
4405-30	Ch. 4,8/30 cm	0,028"/150 cm	11371018
4406-24	Ch. 6,0/24 cm	0,035"/100 cm	11371024
4406-26	Ch. 6,0/26 cm	0,035"/100 cm	11371030
4406-28	Ch. 6,0/28 cm	0,035"/100 cm	11371047
4406-30	Ch. 6,0/30 cm	0,035"/100 cm	11371053

REF REF	Dauerschleife Stent	Mandrin Guidewire	PZN PZN
4407-24	Ch. 7,0/24 cm	0,035"/100 cm	11371082
4407-26	Ch. 7,0/26 cm	0,035"/100 cm	11371099
4407-28	Ch. 7,0/28 cm	0,035"/100 cm	11371107
4407-30	Ch. 7,0/30 cm	0,035"/100 cm	11371136
4408-24	Ch. 8,0/24 cm	0,038"/100 cm	11371142
4408-26	Ch. 8,0/26 cm	0,038"/100 cm	11371159
4408-28	Ch. 8,0/28 cm	0,038"/100 cm	11371165
4408-30	Ch. 8,0/30 cm	0,038"/100 cm	11371171
4409-26	Ch. 9,0/26 cm	0,038"/100 cm	11371194
4409-28	Ch. 9,0/28 cm	0,038"/100 cm	11371202
4409-30	Ch. 9,0/30 cm	0,038"/100 cm	11371219

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

# UROMED »HYDROPUR®« INTRA-OPERATIV

## UROMED »HYDROPUR®« INTRA-OPERATIVE

**REF 4460**

**Zylindrische Spitze  
beidseitig geschlossen  
mit Perforation im  
Ureterteil**


**Both tips closed with  
perforation in the  
ureteral part**

**Katheter zur intra-operativen  
inneren Schienung des Ureters**

- Set für offen-chirurgische Eingriffe
- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- zur Langzeitanwendung geeignet
- gutes Vorschiebehaviorn durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleine, kreisrunde Pigtails
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert

**Catheter for intra-operative  
internal stenting of the ureter**

- set for open surgery
- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- suitable for long-term application
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtails
- atraumatic eyes
- overall radiopaque
- graduated

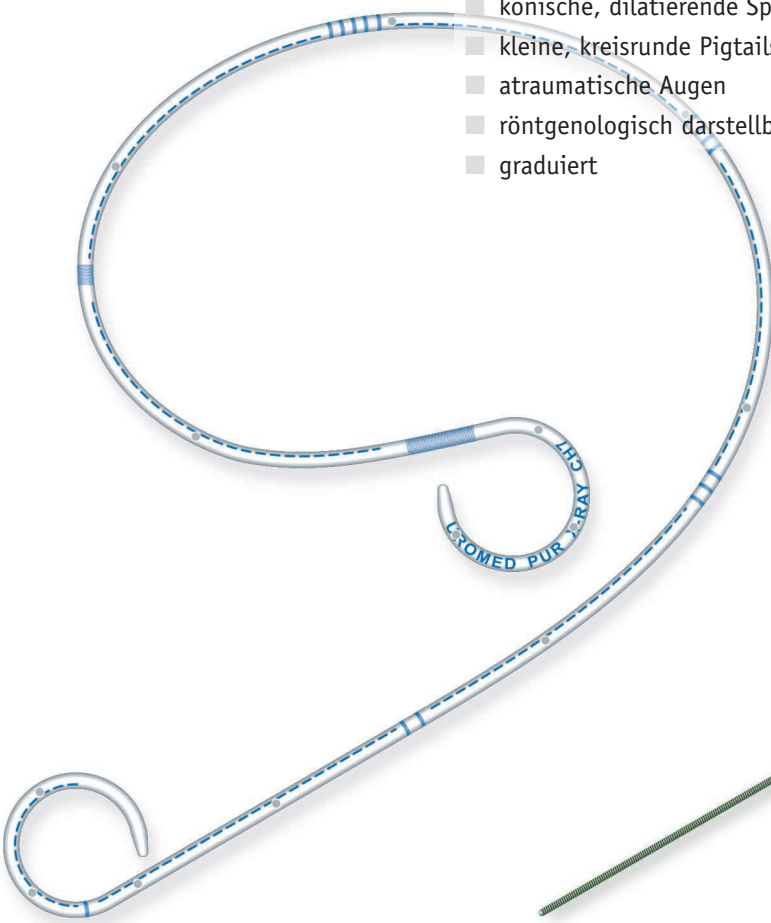

Ureter-Dauerschiene  
beidseitiger Pigtail  
*ureteral stent, double pigtail  
both ends closed with  
perforation in the ureteral part*

Spiralmandrin  
PTFE-beschichtet  
*guidewire  
PTFE coated*

REF <i>REF</i>	Dauerschiene <i>Stent</i>	Mandrin <i>Guidewire</i>	PZN <i>PZN</i>
4460 - 28	Ch. 7,0 / 28 cm	0,035" / 100 cm	11371716
4460 - 30	Ch. 7,0 / 30 cm	0,035" / 100 cm	11371722

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

# UROMED »HYDROPUR®« EXTERNE ABLEITUNG

## UROMED »HYDROPUR®« EXTERNAL DRAINAGE

REF 4465 – 4468

Zylindrische Spitze

Länge 70 cm


ohne Perforation im Ureterteil

*Closed tip*

*Length 70 cm*

*without perforation*


*in the ureteral part*

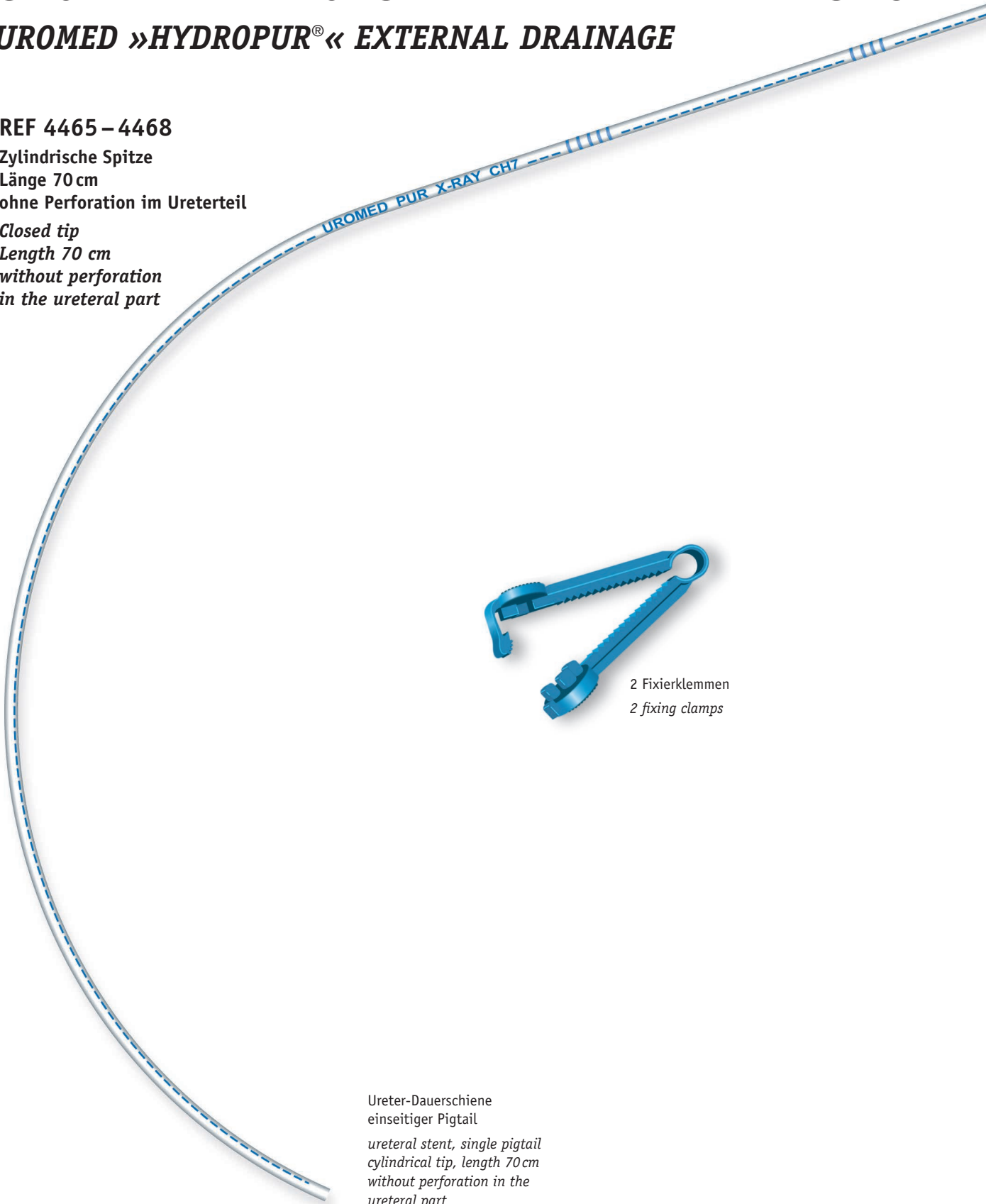

2 Fixierklemmen  
2 fixing clamps

Ureter-Dauerschiene  
einseitiger Pigtail

*ureteral stent, single pigtail  
cylindrical tip, length 70 cm  
without perforation in the  
ureteral part*

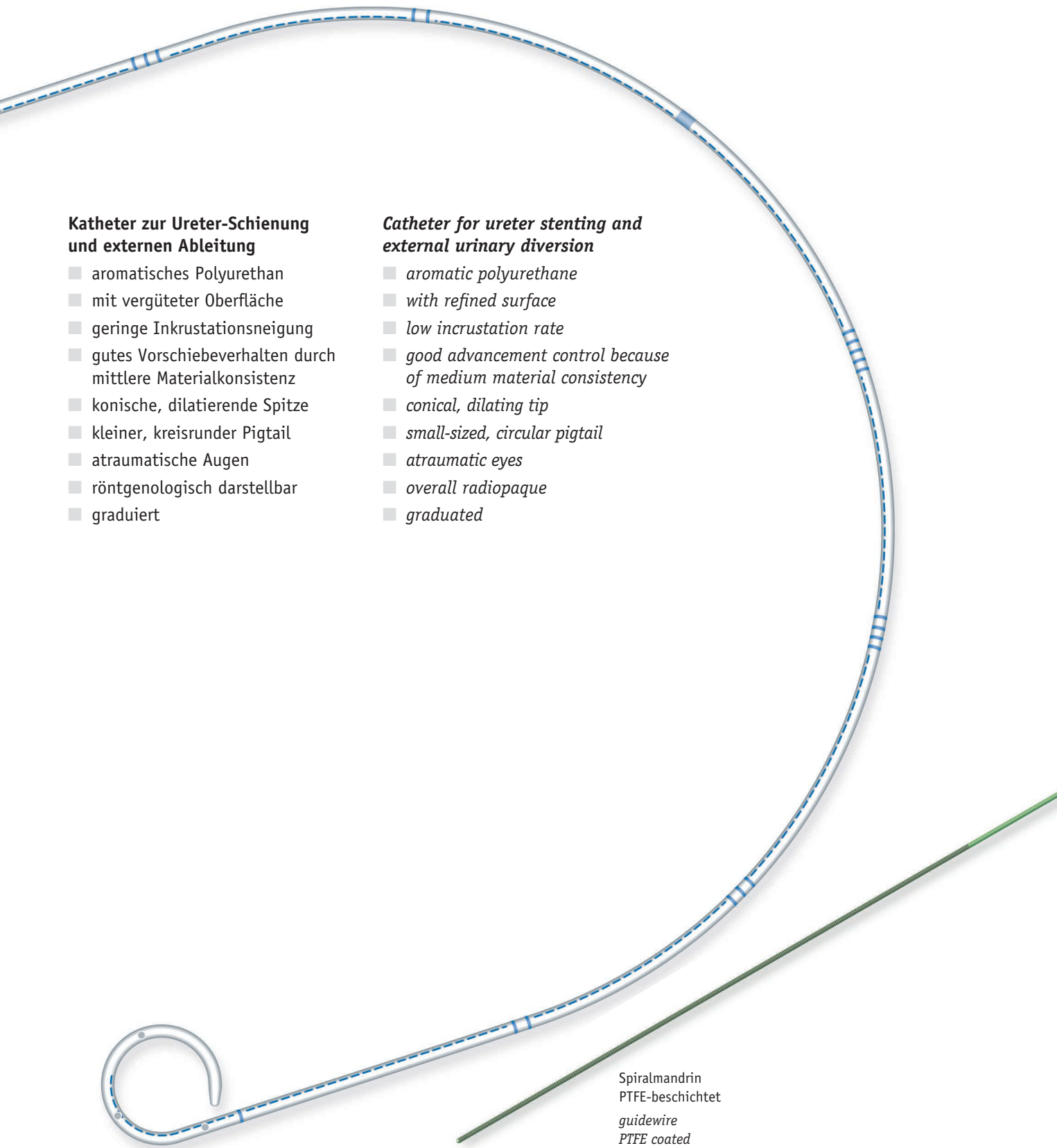

**Katheter zur Ureter-Schienung und externen Ableitung**

- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- gutes Vorschiebehaviorn durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleiner, kreisrunder Pigtail
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert

**Catheter for ureter stenting and external urinary diversion**

- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtail
- atraumatic eyes
- overall radiopaque
- graduated

Spiralmandrin  
PTFE-beschichtet  
guidewire  
PTFE coated

REF REF	Dauerschienne Stent	Mandrin Guidewire	PZN PZN
4465	Ch. 4,8 / 70 cm	0,028" / 150 cm	11371573
4466	Ch. 6,0 / 70 cm	0,035" / 100 cm	11371596
4467	Ch. 7,0 / 70 cm	0,035" / 100 cm	11371604
4468	Ch. 8,0 / 70 cm	0,038" / 100 cm	11371610

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces

# UROMED »HYDROPUR®« EXTERNE ABLEITUNG

## UROMED »HYDROPUR®« EXTERNAL DRAINAGE

REF 4475 – 4479

Zentral offene Spitze

Länge 70 cm

ohne Perforation im Ureterteil

*Open tip*

*Length 70 cm*

*without perforation*

*in the ureteral part*

### Katheter zur Ureter-Schienung und externen Ableitung

- Set zur Applikation in Seldinger-Technik
- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- gutes Vorschiebehaviorhalten durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleiner, kreisrunder Pigtail
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert


### Catheter for ureter stenting and external urinary diversion

- set for application in Seldinger-technique
- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtail
- atraumatic eyes
- overall radiopaque
- graduated



Ureter-Dauerschleife  
einseitiger Pigtail

*ureteral stent, single pigtail  
central open tip, length 70 cm  
without perforation in the  
ureteral part*

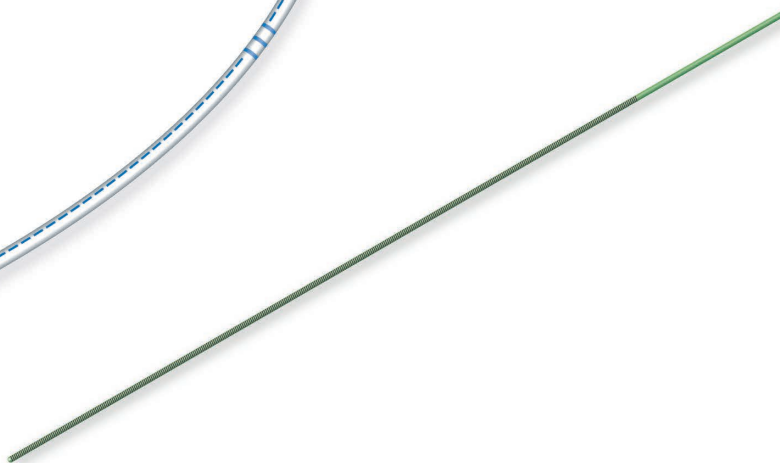

Spiralmantel  
PTFE-beschichtet

*guidewire  
PTFE coated*

REF REF	Dauerschleife Stent	Mantel Guidewire	PZN PZN
4475	Ch. 4,8 / 70 cm	0,028" / 150 cm	11371633
4476	Ch. 6,0 / 70 cm	0,035" / 150 cm	11371662
4477	Ch. 7,0 / 70 cm	0,035" / 150 cm	11371679
4478	Ch. 8,0 / 70 cm	0,035" / 150 cm	11371685
4479	Ch. 9,0 / 70 cm	0,038" / 150 cm	11371691


**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

# UK-QUETSCHVERBINDER

## COMPRESSION ADAPTER

REF 5032

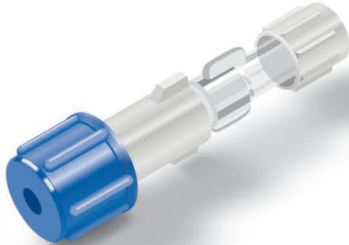

Adapter für Ureter-Katheter/Spritze

■ Luer-Lock-Ansatz


Adapter for ureteral catheter/syringe

■ Luer-Lock connector

REF	Länge
REF	Length
5032	6 cm

**Verpackung:** steril  
**Original-Karton:** 100 Stück  
**Packing:** sterile  
**Original carton:** 100 pieces

REF 5034/5035

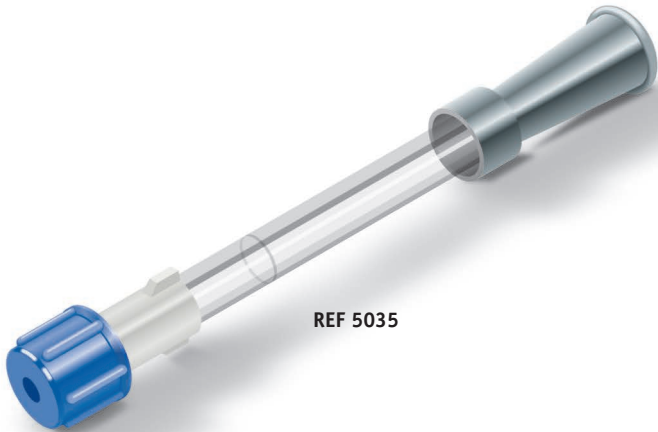

Adapter für Ureter-Katheter/  
 Urin-Beutel

■ Trichter-Ansatz

Adapter for ureteral catheter/  
 urine bag

■ funnel connector

REF	Länge
REF	Length
5034	7 cm
5035	12 cm

**Verpackung:** steril  
**Original-Karton**  
**REF 5034:** 100 Stück  
**REF 5035:** 50 Stück  
**Packing:** sterile  
**Original carton:**  
**REF 5034:** 100 pieces  
**REF 5035:** 50 pieces

**UROMED Kurt Drews KG**  
**Meessen 7/11**  
**D-22113 Oststeinbek**

<b>Telefon</b>	<b>Zentrale Kliniken Praxen Apotheken/Handel</b>	<b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 0</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 11</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 21</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 31</b>
----------------	--	---

<b>Telefax</b>		<b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 99</b>
----------------	--	----------------------------------

<b>Internet</b>		<b><a href="http://www.uromed.de">www.uromed.de</a></b>
-----------------	--	---

<b>E-Mail</b>		<b><a href="mailto:service@uromed.de">service@uromed.de</a></b>
---------------	--	---

Die Angaben entsprechen unserem  
Kenntnisstand bei Drucklegung.  
Produktänderungen aufgrund technischen  
Fortschrittes vorbehalten.

*All indications correspond to our know-  
ledge at the date of press.  
Due to technical progress all products are  
subject to change.*

Material-Nr. 0025 · Rev. 2 · 06/2020

© UROMED Kurt Drews KG

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE