

Drainagesysteme Inkontinenz

Drainage Systems Incontinence



**Harnableitungs- und
Inkontinenzprogramm**
*Urinary Drainage and
Incontinence Program*

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

UROMED ist Fördermitglied von:
UROMED is sponsor of:

- Deutsche Kontinenzgesellschaft e. V.
- Inkontinenz Selbsthilfe e. V.



INHALT

CONTENT

Geschlossene Urindrainagesysteme <i>Closed Urine Drainage Systems</i>	4
Geschlossenes Urindrainagesystem zur Tag- und Nachtversorgung <i>Closed Urine Drainage System for Day and Night Care</i>	7
Geschlossenes Urinmesssystem <i>Closed Urine Measurement System</i>	8
Urindrainagesystem <i>Urine Drainage System</i>	10
Urinbeutel <i>Urine Bag</i>	12
Urinbeinbeutel mit 3-Kammersystem <i>Urine Leg Bag with 3-Chamber System</i>	13
Urinbeinbeutel <i>Urine Leg Bags</i>	14
Urindrainage Zubehör <i>Urine Drainage Accessories</i>	16
Kondomurinale <i>Male External Catheters</i>	19

UROMED CYSTOBAG TK 2000

geschlossenes Urindrainagesystem

Closed Urine Drainage System

REF 4803

2000 ml
Schlauchlänge 112 cm

2000 ml
tube length 112 cm

UROMED CYSTOBAG Urindrainagesysteme orientieren sich an den aktuellen Anforderungen der Anwender in der Praxis – überzeugen Sie sich selbst!

UROMED CYSTOBAG urine drainage systems are based on the current needs of the users in practice – convince yourself!

Steriler Urinbeutel zum Auffangen von Urin nach Ableitung durch einen Katheter

- Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse
- nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- Schlauch mit Profil
- Schlauchklemme
- Lakenklemme
- zweiteilige Tropfkammer mit Rücklaufventil
- Belüftung an Tropfkammer und Beutel
- universell einsetzbarer Zwillingshalter mit Fixationskordel
- übersichtliche Graduierung
- T-TAP-Ablasshahn Halterung
- T-TAP-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- großlumiger Ablasshahn für schnelle Entleerung
- extrem kurze Beutellänge, 29 cm
- Beschriftungsfeld für Patientendaten


Sterile urine bag for collection of urine drained with a catheter


- step connector for reliable links
- needle-free spot for urine specimen
- tube with profile
- tubing clamp
- bed-sheet clamp
- two-part drip chamber with non-return valve
- air vent on drip chamber and bag
- double hanger with strip for all-purpose use
- clearly graduated
- dockhouse
- T-TAP outlet one-handed usable without contamination
- tap with wide lumen for fast emptying
- extremely short bag, 29 cm
- label field for patient data

REF REF	Schlauchlänge Tube length	Volumen Volume
4803	112 cm	2000 ml

Verpackung: steril
Verpackungseinheit: 10 Stück
Originalkarton: 20 Stück

Packaging: sterile
Packing unit: 10 pieces
Original carton: 20 pieces

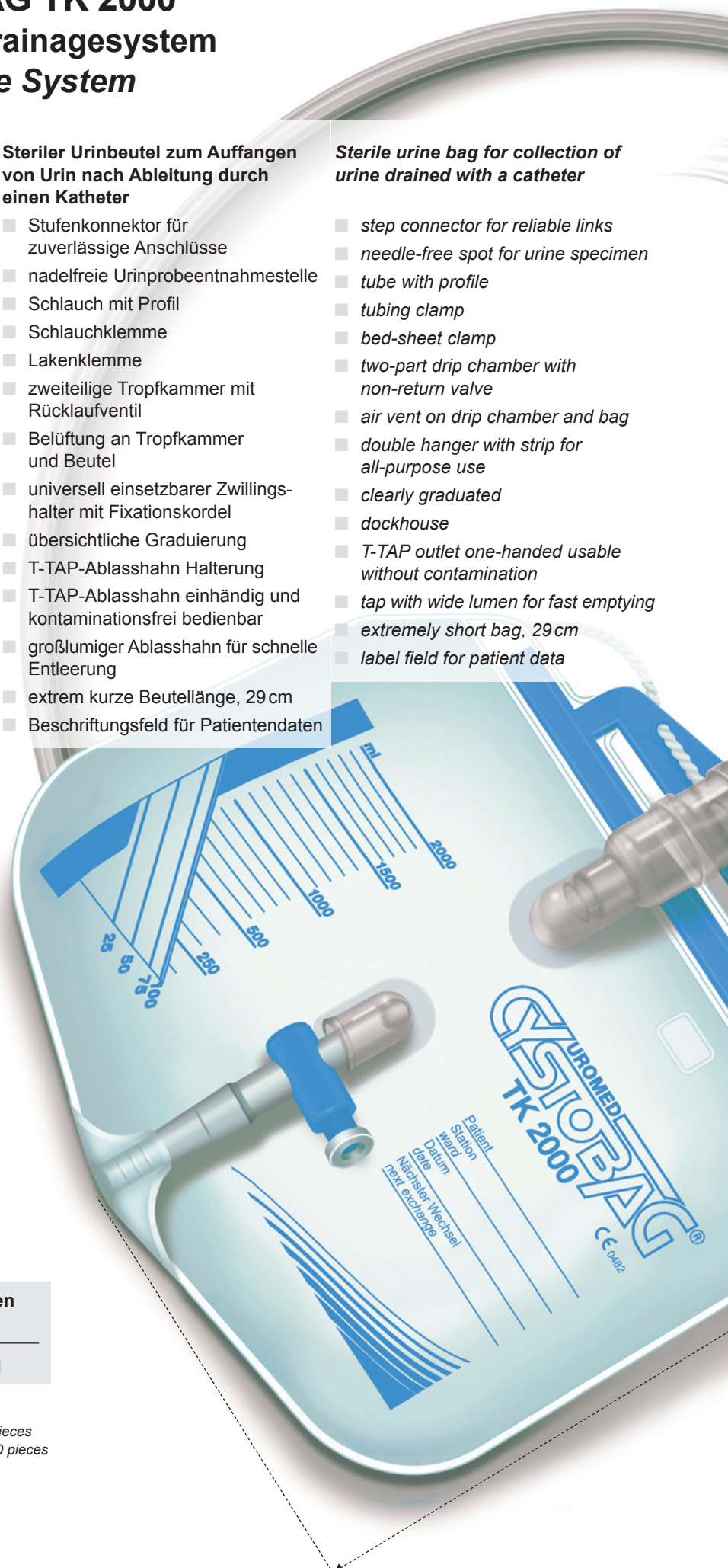

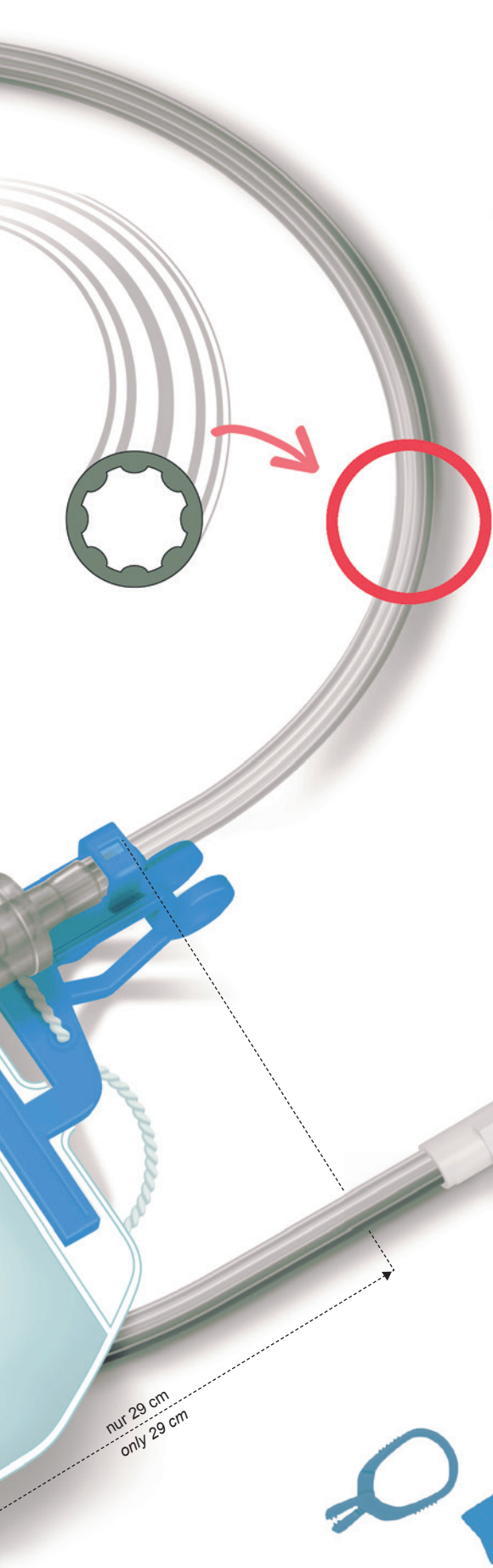

Entleeren leicht gemacht.

Der einhändig und kontaminationsfrei bedienbare T-TAP-Ablassshahn sorgt durch seinen großen Innendurchmesser für einen schnellen Ablauf.

Easy emptying.

The T-TAP outlet for one-handed use without contamination ensures a fast drain due to its wide inner diameter.

Ein Schlauch mit Profil.

Ziel ist es, eine Ableitung unter allen Umständen aufrechtzuerhalten. Der oktogonal profilierte Zuleitungsschlauch gewährleistet auch in geknicktem oder eingedrücktem Zustand eine Drainage.

A tube with profile.

The objective is to maintain a drainage at all events. The octagonally profiled supply tube guarantees a drainage even if it is bent or pressed.

Der Überall-Halter.

Der UROMED Zwillingshalter zeichnet sich durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten an verschiedensten Bettgestellen aus und positioniert sich bei korrekter Anbringung senkrecht, wodurch ein freier Tropfenfall gewährleistet wird. Dieser verhindert das Aufsteigen von Keimen.

The All-Purpose-Holder.

The UROMED double hanger is characterized by its universal application possibilities on various bedsteads and, when correctly attached, positions itself vertically, which ensures a free fall of the drops. This prevents germs from rising.

Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse.

Mit den ausgeprägten Stufen des Konnektors wird eine optimale Verbindung mit dem Katheter erreicht und Leckagen werden vermieden. Aufgrund der direkten Abstimmung auf die Trichter der UROMED Silikonballonkatheter ist die Verbindung hier besonders gut.

Step connector for reliable links.

With the distinct steps of the connector an optimal link with the catheter will be achieved and leakage will be avoided. Due to the direct adjustment to the funnels of the UROMED silicone balloon catheters the link is particularly good in this case.

Lakenklemme und Schlauchklemme.


Die geschlossenen Urindrainagesysteme können am Patientenbett befestigt werden, indem die Lakenklemme am Bettlaken befestigt wird.

Bevor eine Urinprobe aus der nadelfreien Urinprobeentnahmestelle entnommen wird, ist der Abfluss im Zuleitungsschlauch zu blocken, indem der Schlauch in das schmale Ende der Schlauchklemme geschoben wird.

Bed-sheet clamp and tubing clamp.

The closed urine drainage systems can be fixed at the patients' bed by clipping the bed-sheet clamp to the bed sheet.

Before taking an urine sample from the needle-free sampling port, block the drain in the inlet tubing, by pushing the tube into the tight end of the tubing clamp.

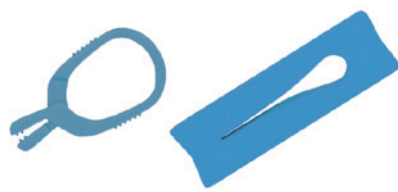

nur 29 cm
only 29 cm

UROMED CYSTOBAG TK 4000

geschlossenes Urindrainagesystem

Closed Urine Drainage System

REF 4810

4000 ml
Schlauchlänge 112 cm

4000 ml
tube length 112 cm

Der UROMED CYSTOBAG TK 4000 mit 4000 ml Fassungsvermögen wurde speziell für die Bedürfnisse im stationären Sektor entwickelt. Das in der Tropfkammer integrierte Rücklaufventil gewährt einen großlumigen Durchlauf, sodass bei möglichen Geweberückständen oder Blutkoageln ein ungehinderter Abfluss des Urins möglich ist.

UROMED CYSTOBAG TK 4000 with a capacity of 4000 ml has been developed especially for the requirements in the stationary sector. The non-return valve integrated in the drip chamber ensures a large lumen flow, so that an unhindered drainage of the urine is provided also in case of possible residual tissue or blood clots.

Steriler Urinbeutel zum Auffangen von Urin nach Ableitung durch einen Katheter

- Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse
- nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- Schlauch mit Profil
- Schlauchklemme
- Lakenklemme
- zweiteilige Tropfkammer mit Rücklaufventil
- Belüftung an Tropfkammer und Beutel
- universell einsetzbarer Zwillingshalter mit Fixationskordel
- übersichtliche Graduierung
- T-TAP-Ablasshahn Halterung
- T-TAP-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- großlumiger Ablasshahn für schnelle Entleerung

Sterile urine bag for collection of urine drained with a catheter

- step connector for reliable links
- needle-free spot for urine specimen
- tube with profile
- tubing clamp
- bed-sheet clamp
- two-part drip chamber with non-return valve
- air vent on drip chamber and bag
- double hanger with strip for all-purpose use
- clearly graduated
- dockhouse
- T-TAP outlet one-handed usable without contamination
- tap with wide lumen for fast emptying



REF	Schlauchlänge	Volumen
REF	Tube length	Volume
4810	112 cm	4000 ml

Hilfsmittelkatalog: 15.25.07.0071

Verpackung: steril
Originalkarton: 20 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 20 pieces

UROMED CYSTOBAG TK 1000 S 30/S 60/S 90

geschlossenes Urindrainagesystem zur Tag- und Nachtversorgung

Closed Urine Drainage System for Day and Night Care

REF 4870/4871/4872

1000 ml

Schlauchlänge 30 cm/60 cm/90 cm

Vliesbeschichtung

1000 ml

tube length 30 cm/60 cm/90 cm

fleece cover

Der UROMED CYSTOBAG TK 1000 für die Tag- und Nachtversorgung vereint die Vorteile eines geschlossenen Urindrainagesystems mit den Vorzügen eines Beinbeutels und der damit verbundenen Mobilität des Patienten. Ein häufiges Diskonnektieren verschiedener Systeme am Kathetertrichter entfällt. Zur Befestigung am Ober- bzw. Unterschenkel empfehlen wir unser UROMED Klettbandset REF 4896.


UROMED CYSTOBAG TK 1000 for day and night care combines the advantages of a closed urine drainage system with the features of an urine leg bag and the mobility of the patient involved. A frequent disconnecting of different systems at the catheter funnel will be stopped. For the fixation at the femur or lower leg we recommend our UROMED hook-and-loop-strap set REF 4896.

Steriler Urinbeutel zum Auffangen von Urin nach Ableitung durch einen Katheter

- mit latexfreien Handschuhen
- Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse
- nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- Tropfkammer mit Rücklaufventil
- Belüftung an Tropfkammer und Beutel
- Fixationskordel zur universellen Befestigung
- übersichtliche Graduierung
- T-TAP-Ablasshahn Halterung
- T-TAP-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- Vliesbeschichtung auf der Beutelnrückseite

Sterile urine bag for collection of urine drained with a catheter

- with gloves free of latex
- step connector for reliable links
- needle-free spot for urine specimen
- drip chamber with non-return valve
- air vent on drip chamber and bag
- strip for all-purpose fixation
- clearly graduated
- dockhouse
- T-TAP outlet one-handed usable without contamination
- fleece cover on the reverse side of the bag

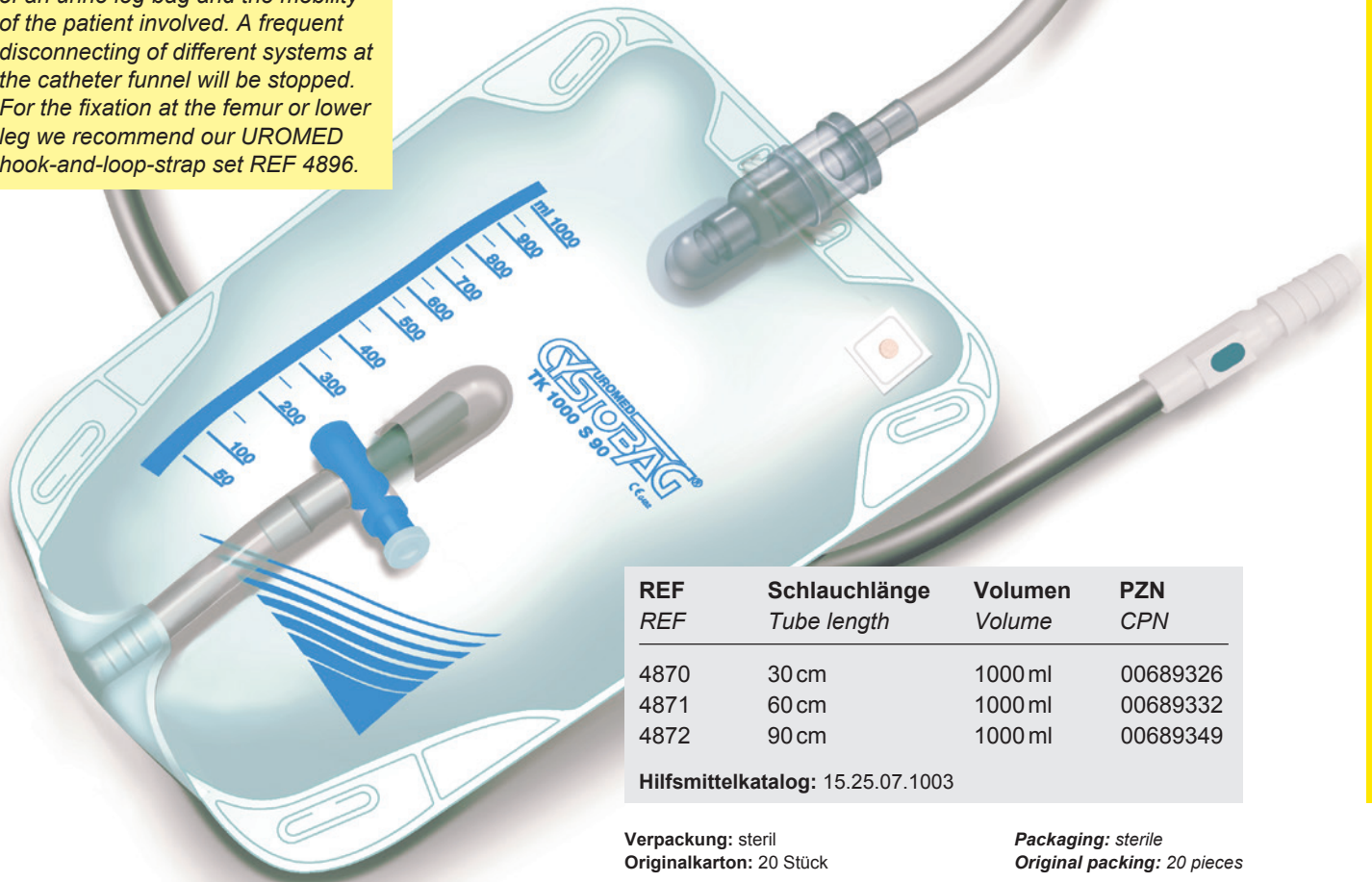

REF	Schlauchlänge	Volumen	PZN
REF	Tube length	Volume	CPN
4870	30 cm	1000 ml	00689326
4871	60 cm	1000 ml	00689332
4872	90 cm	1000 ml	00689349

Hilfsmittelkatalog: 15.25.07.1003

Verpackung: steril
Originalkarton: 20 Stück

Packaging: sterile
Original packing: 20 pieces

UROMED CYSTOBAG Urimeter 400

geschlossenes Urinmesssystem

Closed Urine Measurement System

REF 4830

2600 ml
Schlauchlänge 150 cm

2600 ml
tube length 150 cm

Das UROMED CYSTOBAG Urimeter 400 besteht aus einer Messkammer mit einem Volumen von 400 ml sowie einem fest verbundenen Urinbeutel mit einem Volumen von 2600 ml. Dadurch wird eine effiziente und zeitsparende Entleerung des Systems gewährleistet.

UROMED CYSTOBAG Urimeter 400 consists of a measurement chamber with a volume of 400 ml and a firmly connected urine bag with a volume of 2600 ml. This guarantees an effective and time-saving emptying of the system.

Steriles geschlossenes Urinmesssystem zum Auffangen von Urin nach Ableitung durch einen Katheter und Überwachung des Urinabgangs

Schlauch:

- Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse
- nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- Schlauch mit Profil
- Schlauchklemme
- Lakenklemme

Messkammer:

- Tropfkammer mit Rücklaufventil
- Belüftung an Messkammer und Beutel
- universell einsetzbarer Zwillingshalter mit Fixationskordel
- 400 ml Messkammer mit präziser und übersichtlicher Graduierung
- Unterteilung der Messkammer in Fein- (1 ml) und Grobmessseinheit (5 ml)
- Drehverschluss zur Entleerung einhändig und kontaminationsfrei bedienbar

Auffangbeutel:

- übersichtliche Graduierung
- T-TAP-Ablasshahn Halterung
- T-TAP-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- großlumiger Ablasshahn für schnelle Entleerung

Sterile closed urine measurement system for collection of urine drained with a catheter and monitoring of the urinary output

Tube:

- *step connector for reliable links*
- *needle-free spot for urine specimen*
- *tube with profile*
- *tubing clamp*
- *bed-sheet clamp*


Measurement chamber:

- *drip chamber with non-return valve*
- *air vent on measurement chamber and bag*
- *double hanger with strip for all-purpose use*
- *400 ml measurement chamber precisely and clearly graduated*
- *division of the measurement chamber into fine (1 ml) and rough (5 ml) measurement units*
- *handle for emptying one-handed use without contamination*

Collector bag:

- *clearly graduated*
- *dockhouse*
- *T-TAP outlet one-handed usable without contamination*
- *tap with wide lumen for fast emptying*



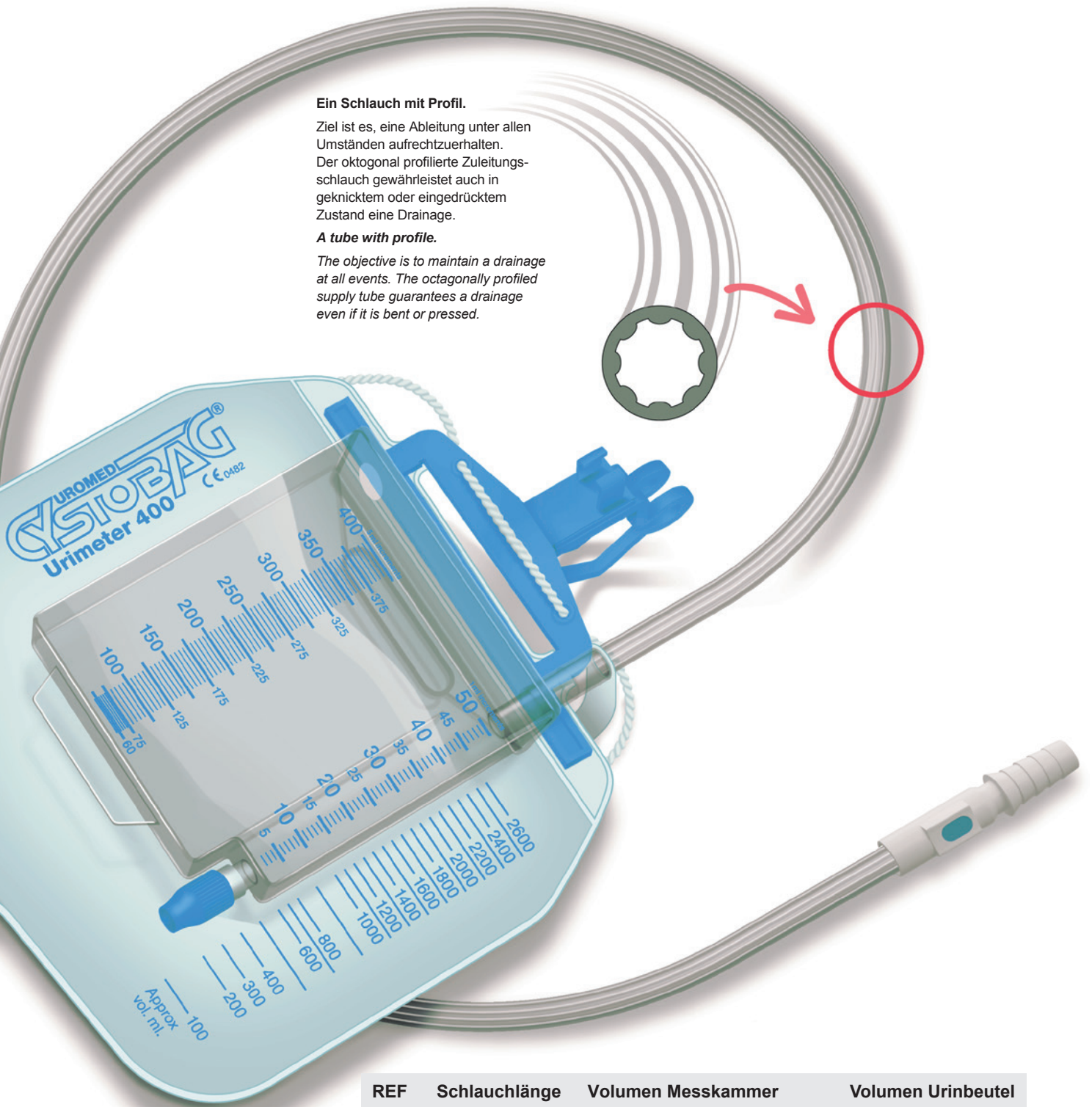

Ein Schlauch mit Profil.

Ziel ist es, eine Ableitung unter allen Umständen aufrechtzuerhalten. Der oktagonally profilierte Zuleitungsschlauch gewährleistet auch in geknicktem oder eingedrücktem Zustand eine Drainage.

A tube with profile.

The objective is to maintain a drainage at all events. The octagonally profiled supply tube guarantees a drainage even if it is bent or pressed.

REF	Schlauchlänge	Volumen Messkammer	Volumen Urinbeutel
REF	Tube length	Volume measurement chamber	Volume urine bag
4830	150 cm	400 ml	2600 ml

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED CYSTOBAG LS 2000

Urindrainagesystem

Urine Drainage System

REF 4801 / 4860

2000 ml
Schlauchlänge 110 cm

2000 ml
tube length 110 cm

Das sterile Urindrainagesystem ist vielfältig einsetzbar. Es lässt sich sowohl mit einem Katheter als auch mit einem Katheterventil oder einem Katheterventiladapter verbinden.


The sterile urine drainage system can be used in a variety of ways. It can be connected to a catheter as well as to a catheter valve or a catheter valve adapter.

Steriler Urinbeutel zum Auffangen von Urin nach Ableitung durch einen Katheter

- Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse
- nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- flexibler Schlauch
- Schlauchklemme
- Rücklaufventil
- übersichtliche Graduierung
- T-TAP-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- Beschriftungsfeld für Patientendaten

Sterile urine bag for collection of urine drained with a catheter

- *step connector for reliable links*
- *needle-free spot for urine specimen*
- *flexible tube*
- *tubing clamp*
- *non-return valve*
- *clearly graduated*
- *T-TAP outlet one-handed usable without contamination*
- *label field for patient data*

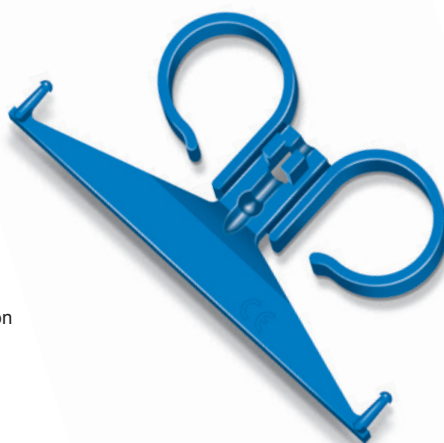

REF 4860

UROMED Urinbettbeutelhalter zum Befestigen von UROMED Urinbettbeuteln am Patientenbett

UROMED urine bed bag holder for fastening UROMED urine bed bags to the patient's bed

REF	PZN
REF	CPN
4860	07654549

Hilfsmittelkatalog: 15.99.99.0010

Je 5 Stück UROMED CYSTOBAG LS2000 Urindrainagesysteme wird ein UROMED Urinbettbeutelhalter kostenlos beigelegt.

For every 5 pieces UROMED CYSTOBAG LS2000 urine drainage systems an UROMED urine bed bag holder will be enclosed free of charge.

Verpackung: unsteril
Verpackungseinheit: 10 Stück
Originalkarton: 100 Stück

Packaging: non-sterile
Packing unit: 10 pieces
Original carton: 100 pieces



REF	Schlauchlänge	Volumen	PZN
REF	Tube length	Volume	CPN
4801	110 cm	2000 ml	09175764
Hilfsmittelkatalog: 15.25.06.3008			

Verpackung: steril
Verpackungseinheit: 10 Stück
Originalkarton: 50 Stück

Packaging: sterile
Packing unit: 10 pieces
Original carton: 50 pieces

UROMED Urinbeutel

UROMED Urine Bag

REF 4851

2000 ml
Schlauchlänge 110 cm

2000 ml
tube length 110 cm

Unsteriler Urinbeutel für die Verwendung mit Kondomurinalen

Der UROMED Urinbeutel kann über den Stufenkonnektor mit einem Kondomurinal verbunden werden.

Non-sterile urine bag for use of male external catheters


The UROMED urine bag can be connected to male external catheters via the step connector of the urine bag.

Urinbeutel zum Auffangen von durch ein selbsthaftendes Kondomurinal abgeleitetem Harn

- Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse
- Rücklaufventil
- übersichtliche Graduierung
- T-TAP-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar

Urine bag for the collection of urine drained with a self-adhering male external catheter

- step connector for reliable links
- non-return valve
- clearly graduated
- T-TAP outlet one-handed usable without contamination

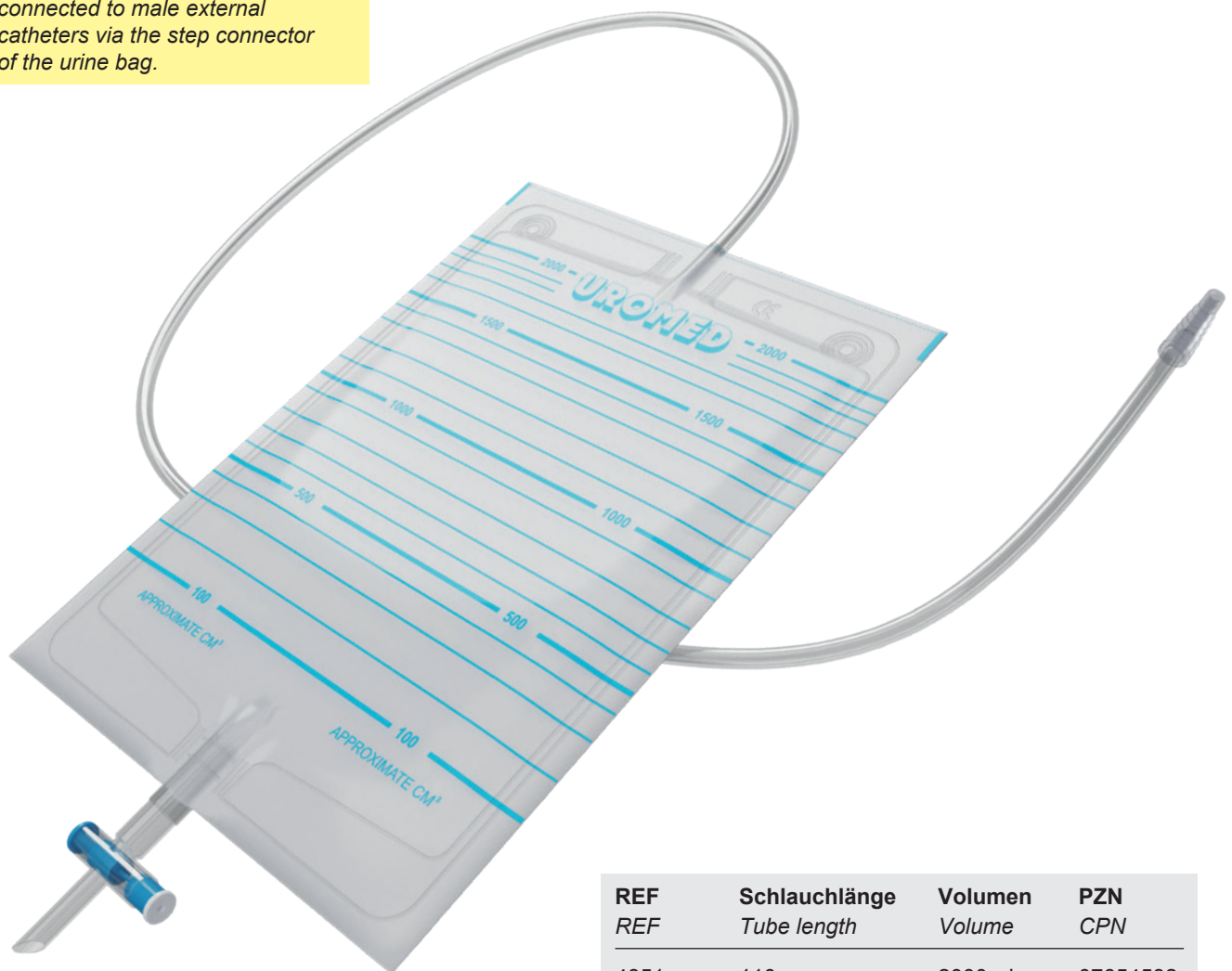

REF REF	Schlauchlänge Tube length	Volumen Volume	PZN CPN
4851	110 cm	2000 ml	07654532
Hilfsmittelkatalog: 15.25.06.1019			

Verpackung: unsteril
Verpackungseinheit: 10 Stück
Originalkarton: 200 Stück

Packaging: non-sterile
Packing unit: 10 pieces
Original carton: 200 pieces

UROMED CYSTOBAG MINI 500 S »secret«

Urinbeinbeutel mit 3-Kammersystem

Urine Leg Bag with 3-Chamber System

REF 4887 / 4888

500 ml
Schlauchlänge 12 cm / 50 cm
Vliesbeschichtung

500 ml
tube length 12 cm / 50 cm
fleece cover

Der UROMED CYSTOBAG MINI 500 S »secret« ist speziell für mobile Patienten entwickelt worden. Durch ein innovatives 3-Kammersystem werden unerwünschte Fließgeräusche des Urins unterdrückt. Darüber hinaus wird ein diskretes Tragen des Systems am Ober- bzw. Unterschenkel gewährleistet.

The UROMED CYSTOBAG MINI 500 S »secret« has been designed especially for mobile patients. Due to an innovative 3-chamber system unwelcome noises of flowing urine are stifled. Beyond that a discrete wearing of the system at the femur or lower leg is ensured.

Steriler Urinbeutel zum Auffangen von Urin nach Ableitung durch einen Katheter

- kurze Beutellänge
- Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse
- Rücklaufventil
- T-TAP-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- Ansatzstück für Nachtbeutel
- Vliesbeschichtung auf der Beutellrückseite

Sterile urine bag for collection of urine drained with a catheter

- short bag length
- step connector for reliable links
- non-return valve
- T-TAP outlet one-handed usable without contamination
- attachment for night bag
- fleece cover on the reverse side of the bag



REF 4887

Schlauchlänge 12 cm
tube length 12 cm

REF 4888

Schlauchlänge 50 cm (kürzbar) – ein zusätzlicher Konnektor wird kostenlos beigelegt
tube length 50 cm (can be shortened) – an additional connector will be enclosed free of charge

REF	Schlauchlänge	Volumen	PZN
REF	Tube length	Volume	CPN
4887	12 cm	500 ml	04791010

Hilfsmittelkatalog: 15.25.05.3054

REF	Schlauchlänge	Volumen	PZN
REF	Tube length	Volume	CPN
4888	50 cm	500 ml	04791027

Hilfsmittelkatalog: 15.25.05.3054

Verpackung: steril
Verpackungseinheit: 10 Stück
Originalkarton: 100 Stück

Packaging: sterile
Packing unit: 10 pieces
Original carton: 100 pieces

Verpackung: steril
Verpackungseinheit: 10 Stück
Originalkarton: 100 Stück

Packaging: sterile
Packing unit: 10 pieces
Original carton: 100 pieces

UROMED CYSTOBAG MINI 750 S/750 KS

Urinbeinbeutel

Urine Leg Bag

REF 4893/4893.50

750 ml

Schlauchlänge 12 cm/50 cm
Vliesbeschichtung

750 ml

tube length 12 cm/50 cm
fleece cover

Steriler Urinbeutel für Dauerkatheträger

Die Vliesbeschichtung der UROMED CYSTOBAG MINI kann dabei helfen, Hautirritationen zu vermeiden. Der zusätzliche Ansatz am Ablasshahn lässt die Konnektion mit einem Urinbeutel ebenfalls für eine Nachtversorgung zu.

Sterile urine bag for patients with permanent catheter


The fleece cover of UROMED CYSTOBAG MINI can help to avoid skin irritations. The additional attachment at the outlet allows the connection with an urine bag also for a night care.

Steriler Urinbeutel zum Auffangen von Urin nach Ableitung durch einen Katheter

- kurze Beutellänge durch hochklappbaren T-TAP-Ablasshahn
- Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse
- T-TAP-Ablasshahn Halterung
- T-TAP-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- Ansatzstück für Nachtbeutel
- Rücklaufventil
- Vliesbeschichtung auf der Beuterrückseite

Sterile urine bag for collection of urine drained with a catheter

- short bag length due to tip-up T-TAP outlet
- step connector for reliable links
- dockhouse
- T-TAP outlet one-handed usable without contamination
- attachment for night bag
- non-return valve
- fleece cover on the reverse side of the bag

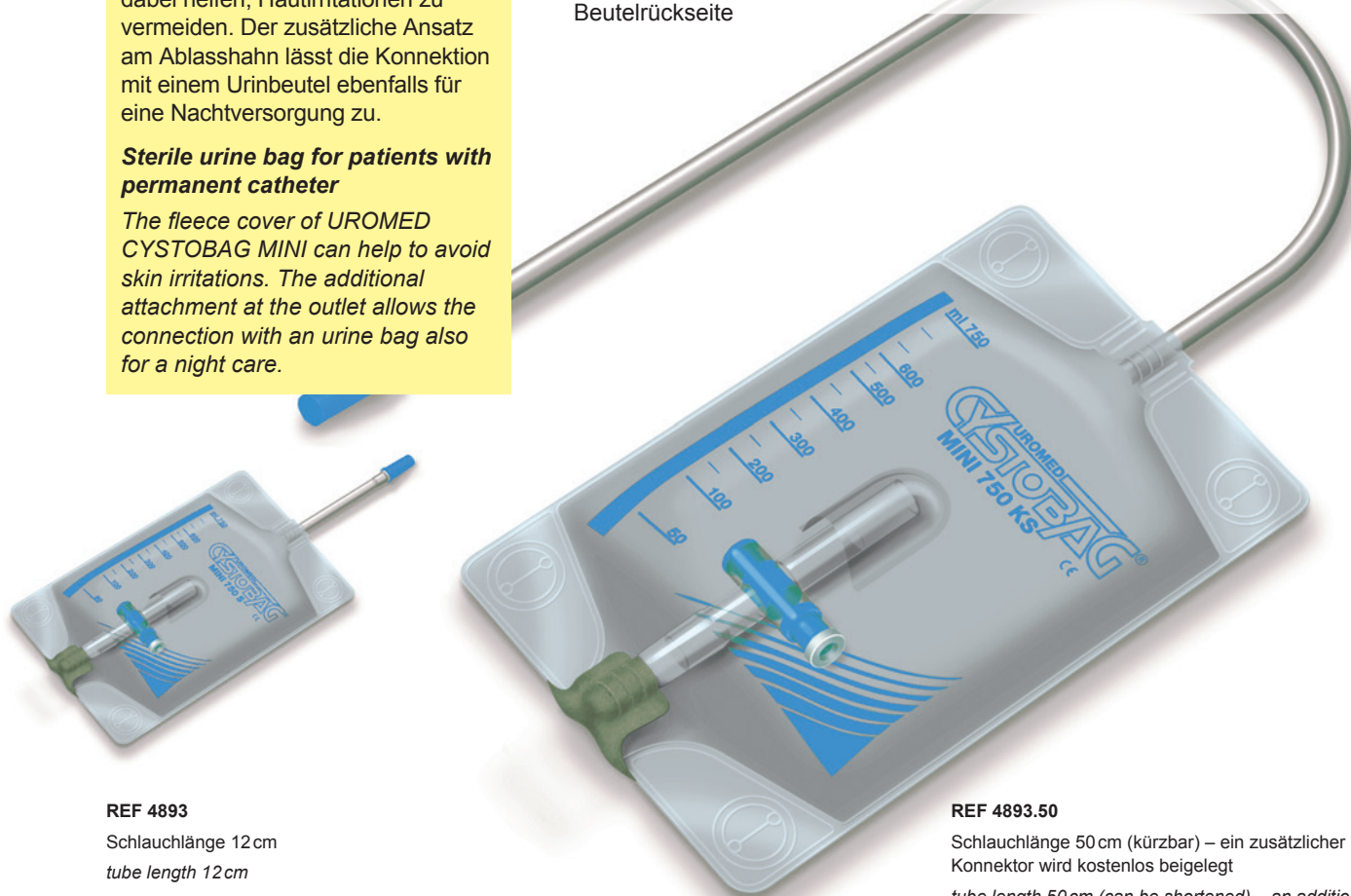

REF 4893

Schlauchlänge 12 cm
tube length 12 cm

REF 4893.50

Schlauchlänge 50 cm (kürzbar) – ein zusätzlicher Konnektor wird kostenlos beigelegt
tube length 50 cm (can be shortened) – an additional connector will be enclosed free of charge

REF REF	Schlauchlänge Tube length	Volumen Volume	PZN CPN
4893	12 cm	750 ml	02433482

Hilfsmittelkatalog: 15.25.05.3048

REF REF	Schlauchlänge Tube length	Volumen Volume	PZN CPN
4893.50	50 cm	750 ml	04242208

Hilfsmittelkatalog: 15.25.05.3048

Verpackung: steril
Verpackungseinheit: 10 Stück
Originalkarton: 100 Stück

Packaging: sterile
Packing unit: 10 pieces
Original carton: 100 pieces

Verpackung: steril
Verpackungseinheit: 10 Stück
Originalkarton: 100 Stück

Packaging: sterile
Packing unit: 10 pieces
Original carton: 100 pieces

UROMED CYSTOBAG MINI 750/750 K

Urinbeinbeutel

Urine Leg Bag

REF 4891 / 4892

750 ml
Schlauchlänge 12 cm / 50 cm
Vliesbeschichtung

750 ml
tube length 12 cm / 50 cm
fleece cover

Unsteriler Urinbeutel für die Verwendung mit Kondomurinalen

Die Vliesbeschichtung der UROMED CYSTOBAG MINI kann dabei helfen, Hautirritationen zu vermeiden. Der zusätzliche Ansatz am Ablasshahn lässt die Konnektion mit einem Urinbeutel ebenfalls für eine Nachtversorgung zu.

Non-sterile urine bag for use of male external catheters


The fleece cover of UROMED CYSTOBAG MINI can help to avoid skin irritations. The additional attachment at the outlet allows the connection with an urine bag also for a night care.

Urinbeutel zum Auffangen von durch ein selbsthaftendes Kondomurinal abgeleitetem Harn

- kurze Beutellänge durch hochklappbaren T-TAP-Ablasshahn
- T-TAP-Ablasshahn Halterung
- T-TAP-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- Ansatzstück für Nachtbeutel
- Rücklaufventil
- Vliesbeschichtung auf der Beutelrückseite

Urine bag for the collection of urine drained with a self-adhering male external catheter

- short bag length due to tip-up T-TAP outlet
- dockhouse
- T-TAP outlet one-handed usable without contamination
- attachment for night bag
- non-return valve
- fleece cover on the reverse side of the bag

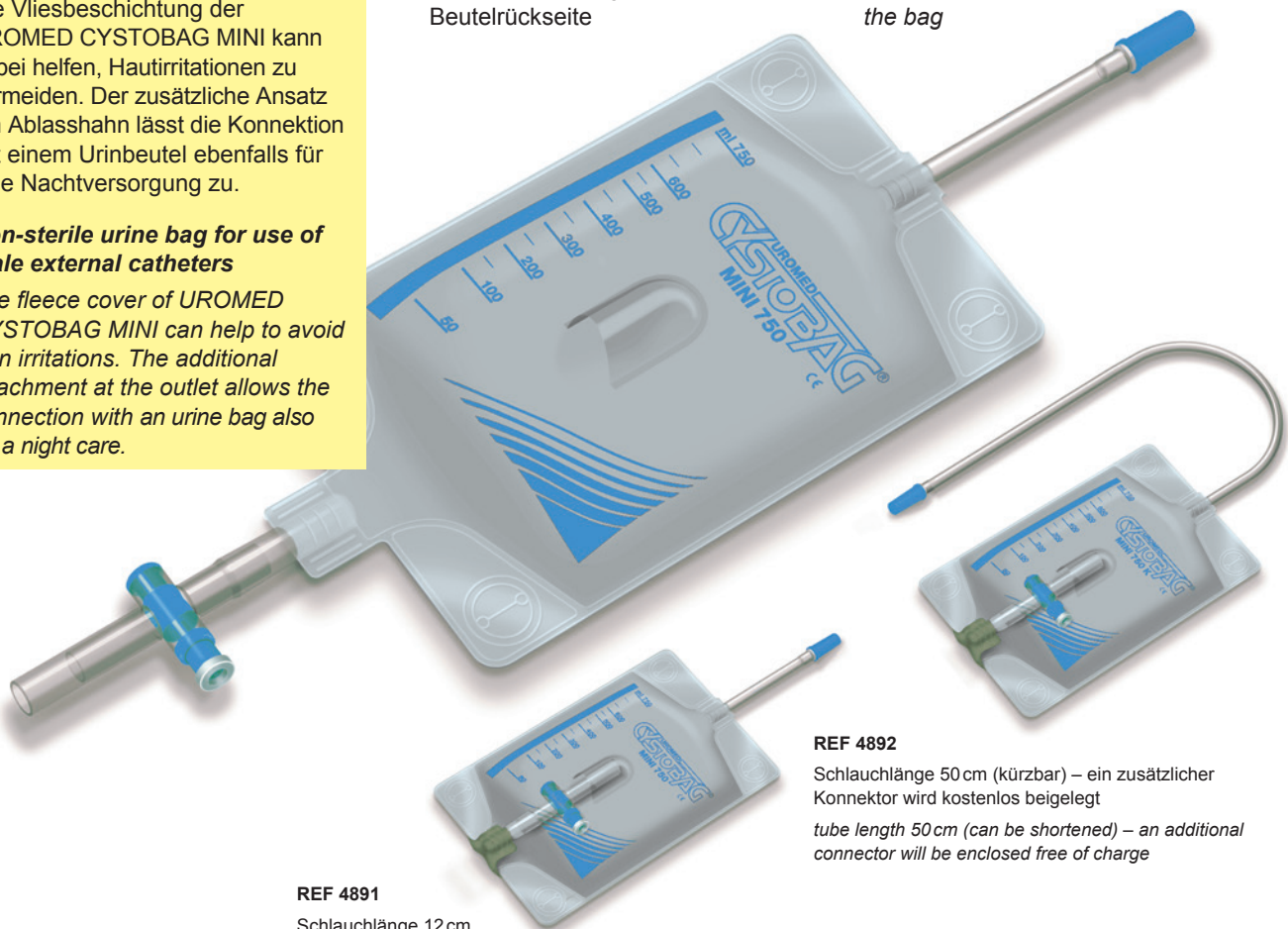

REF 4891
Schlauchlänge 12 cm
tube length 12 cm

REF 4892
Schlauchlänge 50 cm (kürzbar) – ein zusätzlicher Konnektor wird kostenlos beigelegt
tube length 50 cm (can be shortened) – an additional connector will be enclosed free of charge

REF	Schlauchlänge	Volumen	PZN
REF	Tube length	Volume	CPN
4891	12 cm	750 ml	08747827

Hilfsmittelkatalog: 15.25.05.1065

REF	Schlauchlänge	Volumen	PZN
REF	Tube length	Volume	CPN
4892	50 cm	750 ml	00051859

Hilfsmittelkatalog: 15.25.05.1065

Verpackung: unsteril
Verpackungseinheit: 10 Stück
Originalkarton: 200 Stück

Packaging: non-sterile
Packing unit: 10 pieces
Original carton: 200 pieces

Verpackung: unsteril
Verpackungseinheit: 10 Stück
Originalkarton: 150 Stück

Packaging: non-sterile
Packing unit: 10 pieces
Original carton: 150 pieces

UROMED Einbeinhose

UROMED Single Leg Pant

REF 4894

Erleichtern Sie Ihren mobilen Patienten das Tragen eines Beinbeutels. Die UROMED Einbeinhose ist so konzipiert, dass sie sowohl am rechten als auch am linken Bein getragen werden kann. Ein Klettverschluss vereinfacht das Einlegen des Urinbeutels in die Tasche.


Make it easier for your mobile patients to wear a leg bag. The construction of the UROMED single leg pant makes it possible to wear it at the right leg as well as at the left leg. A hook-and-loop-strap simplifies the insertion of the urine bag into the pocket.

Einbeinhose für UROMED Urinbeutel

- hoher Tragekomfort
- mehr Bewegungsfreiheit
- kein Verrutschen des Beutels
- bequeme Entleerung des Urinbeutels
- keine Unterbindung des Blutkreislaufes
- biologisch geprüftes, vorgewaschenes Baumwollmischgewebe (latexfrei)
- breiter, elastischer Gürtel
- einfacher, individuell einstellbarer Klettverschluss

Single Leg Pant for UROMED urine leg bags

- *pleasant to wear*
- *more freedom of movement*
- *no slipping of the bag*
- *easy emptying of the urine bag*
- *for unhindered blood circulation*
- *biologically examined pre-washed cotton mixed fabric (latex-free)*
- *wide, elastic belt*
- *simple and individually adjustable hook-and-loop-strap*

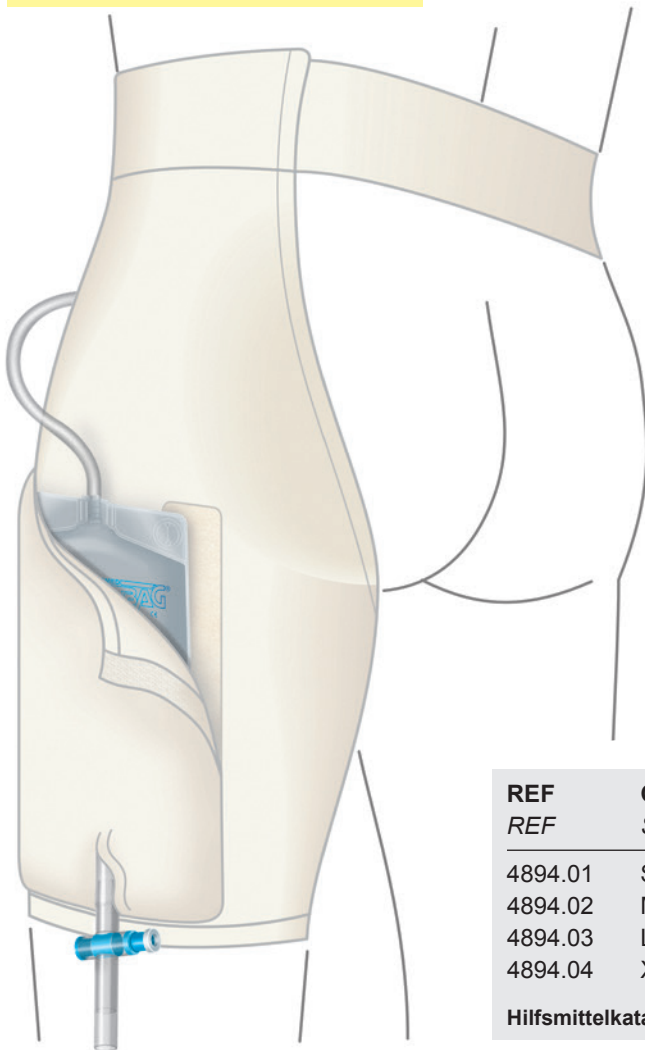

REF REF	Größen Sizes	Taillenumfang Waist circumference	PZN CPN
4894.01	S klein / <i>small</i>	79-87 cm	04743583
4894.02	M mittel / <i>medium</i>	85-95 cm	04743608
4894.03	L groß / <i>large</i>	90-100 cm	04743614
4894.04	XL extra groß / <i>extra large</i>	98-120 cm	04743620

Hilfsmittelkatalog: 15.99.99.0009

Verpackung: unsteril
Originalkarton: 1 Stück

Packaging: non-sterile
Original carton: 1 piece

UROMED Beinbeutelhalter

UROMED Leg Bag Holder

REF 4897

Der UROMED Beinbeutelhalter ermöglicht ein unauffälliges Tragen von Urinbeuteln und bietet durch elastische, breite Bündchen einen guten Halt.


The UROMED leg bag holder permits the unremarkable wear of urine leg bags and offers a sufficient fixation by elastic, wide cuff.

Beinbeutelhalter für UROMED Urinbeutel

- mit eingenähter Tasche
- hoher Tragekomfort
- mehr Bewegungsfreiheit
- kein Verrutschen des Beutels
- kein direkter Kontakt zwischen Haut und Beutel
- bequeme Entleerung des Urinbeutels
- latexfreies Mischgewebe (80% Polyester, 20% Elastan)
- tragbar am rechten oder linken Ober-/Unterschenkel

Leg bag holder for UROMED urine leg bags

- with integrated pocket
- pleasant to wear
- more freedom of movement
- no slipping of the bag
- no direct contact between skin and bag
- easy emptying of the urine bag
- latex-free mixed fabric (80% polyester, 20% elastane)
- wearable either at the right or left upper/lower leg

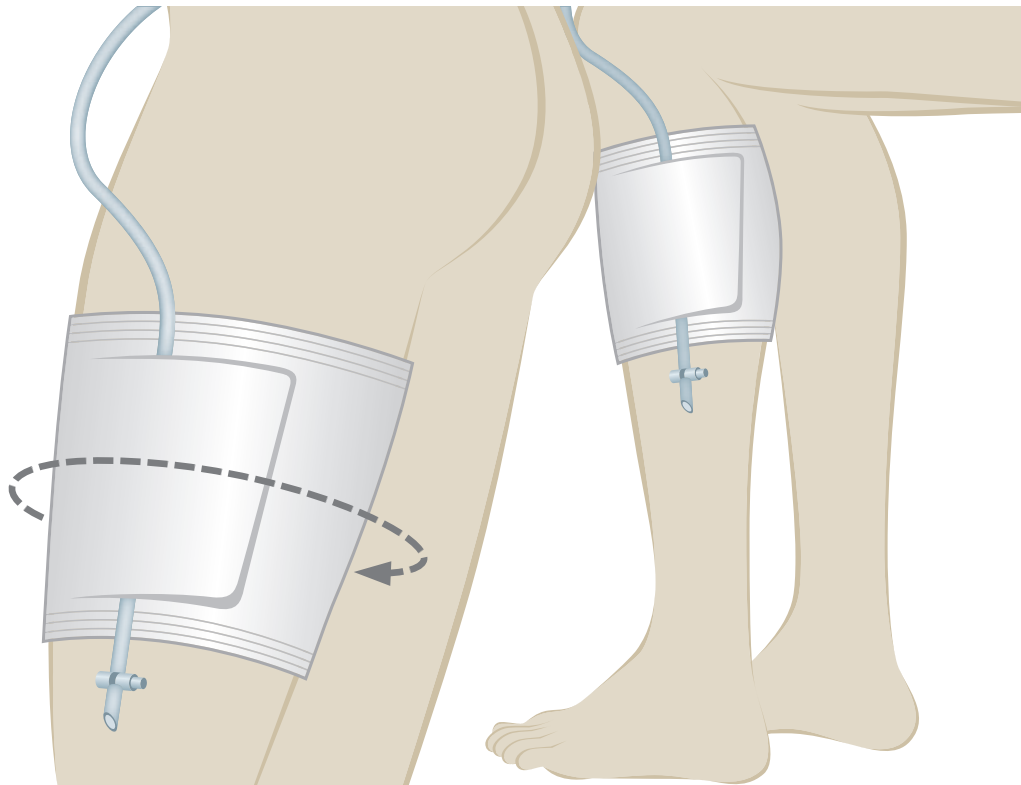

REF REF	Größen Sizes	Beinumfang Leg circumference	PZN CPN
4897.01	S klein / <i>small</i>	30-45 cm	09704091
4897.02	M mittel / <i>medium</i>	45-65 cm	09704116
4897.03	L groß / <i>large</i>	55-80 cm	09704139
4897.04	XL extra groß / <i>extra large</i>	65-90 cm	09704145

Hilfsmittelkatalog: 15.99.99.0009

Verpackung: unsteril
Originalkarton: 1 Stück

Packaging: non-sterile
Original carton: 1 piece

UROMED Klettbandset

UROMED Hook-and-Loop-Strap Set

REF 4896

Bei diesem UROMED Klettbandset besteht die obere und damit entscheidende Fixierung aus einem breiten und komfortablen Klettband. Das untere Fixierband kann an die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst werden.

The upper and crucial fixation of this UROMED hook-and-loop-strap set is the wide and comfortable hook-and-loop-strap. The lower fixation strap may be adjusted individually according to patient's needs.

Medizinprodukt zum Befestigen von UROMED Urinbeinbeuteln

- komfortabel und wirtschaftlich durch Set-Zusammenstellung
- kein Verrutschen des Beutels
- sicherer Halt durch Silikonauflage
- elastisches, hautfreundliches Material
- nicht einschnürend
- große Lasche (D-Ring) für einfaches Öffnen
- latexfrei

Medical Device for fastening of UROMED urine leg bags

- comfortable and economic because all components are offered in the set
- no slipping of the bag
- safe fixation with silicone cover
- elastic and skin-friendly material
- not constricting
- big flap (D-ring) for easy opening
- latex-free

REF REF	Größen Sizes	Beinumfang Leg circumference	PZN CPN
4896.01	S klein / small	23-33 cm	03548974
4896.02	M mittel / medium	33-51 cm	03548980
4896.03	L groß / large	51-68 cm	03549502

Hilfsmittelkatalog: 15.99.99.0008

Verpackung: unsteril

Originalkarton: 1 Paar, 1 Reserve-Fixierband

Packaging: non-sterile

Original carton: 1 pair, 1 spare fixation strap



UROMED Klettband

UROMED Hook-and-Loop-Strap

REF 4895

Medizinprodukt zum Befestigen von UROMED Urinbeinbeuteln

- sicherer Halt durch Silikonauflage
- elastisches, hautfreundliches Material
- nicht einschnürend
- individuell kürzbar
- latexfrei

Medical Device for fastening of UROMED urine leg bags

- safe fixation with silicone cover
- elastic and skin-friendly material
- not constricting
- can be adjusted
- latex-free



REF REF	PZN CPN
4895	00051836

Hilfsmittelkatalog: 15.99.99.0008

Verpackung: unsteril
Originalkarton: 1 Paar

Packaging: non-sterile
Original carton: 1 pair

UROMED Silikonkondomurinal »standard«

UROMED Silicone Male External Catheter »standard«

REF 4940

Kurzkondom für den retrahierten Penis. Die Klebefläche ist optimal an anatomische Gegebenheiten angepasst und sorgt für eine höchstmöglich sichere und zuverlässige Anwendung.

Short male external catheter for use on a retracted penis. The adhesive surface is optimised for anatomical conditions and ensures highest possible safe and reliable use.

Selbstaftendes Kondomurinal zur Harnableitung

- transparentes, reines Silikon
- sehr geringes allergenes Potential
- hautfreundlich und atmungsaktiv
- sehr gutes Abrollverhalten
- sichere Konnektion mit UROMED Urinbeuteln

Self-adhering male external catheter to drain urine

- transparent, pure silicone
- very low allergenic potential
- skin-friendly and breathable
- rolls down very easily
- secure connection with UROMED urine bags



REF REF	Durchmesser Diameter	Klebefläche Adhesive surface	PZN CPN
4940.24	24 mm	40 mm	13650159
4940.28	28 mm	40 mm	13650165
4940.31	31 mm	40 mm	13650171

Hilfsmittelkatalog: 15.25.04.7035

Verpackung: einzeln, unsteril
Originalkarton: 30 Stück

Packaging: individually, non-sterile
Original carton: 30 pieces

UROMED Silikonkondomurinal »sportiv«

UROMED Silicone Male External Catheter »sportiv«

REF 4960

Die große Haftfläche bietet maximale Sicherheit bei sportlicher Aktivität oder aktivem Alltag und sorgt für eine höchstmöglich sichere und zuverlässige Anwendung. Durch die optimale Klebefläche und das Reservoir ist es auch für Rollstuhlfahrer bestens geeignet.

The large adhering surface ensures maximum safety for sporty activities or active lifestyle that enables highest possible safe and reliable use. Due to the optimised adhesive surface and the reservoir it is an ideal solution even for wheelchair users.

Selbstaftendes Kondomurinal zur Harnableitung

- siehe REF 4940

Self-adhering male external catheter to drain urine

- see REF 4940



REF REF	Durchmesser Diameter	Klebefläche Adhesive surface	PZN CPN
4960.24	24 mm	60 mm	13650188
4960.28	28 mm	60 mm	13650194
4960.31	31 mm	60 mm	13650202
4960.35	35 mm	60 mm	13650219

Hilfsmittelkatalog: 15.25.04.7036

Verpackung: einzeln, unsteril
Originalkarton: 30 Stück

Packaging: individually, non-sterile
Original carton: 30 pieces

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
D-22113 Oststeinbek

Zentrale	+49 40 71 30 07-0
Kliniken	+49 40 71 30 07-11
Praxen	+49 40 71 30 07-21
Apotheken/Handel	+49 40 71 30 07-31
Pflegedienste/Altenheime	+49 40 71 30 07-33

Fax +49 40 71 30 07-99

E-Mail service@uromed.de

Internet www.uromed.de

Die Angaben entsprechen unserem
Kenntnisstand bei Drucklegung.
Produktänderungen aufgrund
technischen Fortschritts vorbehalten.

*All indications correspond to our
knowledge at the date of press.
Due to technical progress all products
are subject to change.*

Material-Nr. 0007 · Rev. 4 · 04/2023

©UROMED Kurt Drews KG

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE